

Cortrium Apex 1.26

„Cortrium Apex 1.26“

Naudojimo instrukcijos

1. Numatytoji paskirtis ir įspėjimai	4
2. Diegimas	5
3. Prisijungimas prie „Cortrium Apex“	6
3.1 Išlaikykite naudotojus prisijungusius vietiniame kompiuteryje „Cortrium Apex“ sistemoje	8
4. C3w/C3 ⁺ paruošimas naujam pacientui.....	9
5. Holterio ataskaitos užsakymas.....	12
6. Holterio ataskaitų ir viso įrašo peržiūra.....	16
6.1 Holterio ataskaitų peržiūra	16
6.2 Įrašų peržiūros programa	18
6.3 Santraukos redaktorius.....	19
7. Paciento duomenų redagavimas ir įrašų peržiūra	19
8. Įrašo ištrynimasis	22
9. EDF failo atsisiuntimas	24
9.1 Kaip atsisiųsti EDF failą prieš užsakant Holterio ataskaitą	24
9.2 Kaip atsisiųsti EDF failą užsisakius ataskaitą	26
10. Atsijungimas nuo „Cortrium Apex“	27
11. Programinės įrangos atnaujinimai.....	27
12. Minimalūs techniniai reikalavimai	27
13. Triukščių šalinimas	28

13.1 „Atrodo, kad prietaisas paruoštas pacientui...”	28
13.2 Įrašų suvestinėje rodoma „n/a lead off“ (laidų atjungimas netaikomas) arba „n/a events“ (įvykiai netaikomi)	28
13.3 Interneto ryšys nutrūko.	28
13.4 „Apex“ yra naujai įdiegta, bet neatsidaro	29
14. Saugumo informacija	29
15. Ženklėjimas ir simboliai	30
16. Pareiškimas dėl infrastruktūros	31
I priedas.	32
i. Galimos integracijos	32
ii. GDT paciento failas	33
iii. DICOM paketuota ataskaita	34
iv. CPR paciento paieška	36
v. Tik įkėlėjo vaidmuo	37
vi. „Active Directory“ integravimas	38
vii. Paciento nukreipimas	39
viii. Ataskaitos patvirtinimo eiga	42
ix. „Nereida“ paciento paieška ir ataskaitų teikimas	45

1. Numatytoji paskirtis ir įspėjimai

Numatytoji paskirtis

„Cortrium Apex“ – tai programinė įranga, skirta „Cortrium C3w/C3+“ Holterio monitoriui paruošti prieš naudojant su nauju pacientu, tvarkyti paciento duomenis, užsakyti ir peržiūrėti EKG Holterio ataskaitas, atsisiųsti įrašą .EDF formatu ir peržiūrėti visą EKG įrašą. Be to, įrašymo duomenis galima atsisiųsti ir importuoti į trečiųjų šalių programinę įrangą analizei atlikti. Programinė įranga suderinama ir su „Microsoft Windows“, ir su „MacOS“ (žr. 12 skyrių apie būtiniausius reikalavimus).

Numatytieji naudotojai

Programinė įranga skirta naudoti sveikatos priežiūros specialistams privačioje praktikoje, klinikose ir ligoninėse, taip pat nuotoliniu būdu.

Įspėjimai

- Šį produktą galima naudoti tik pagal numatytąją paskirtį, kaip nurodyta šiose instrukcijose
- Šio produkto naudotojai yra unikalūs ir niekada neturėtų dalytis slaptažodžiais
- Programinės įrangos ekrano nuotraukose gali būti neskelbtinos informacijos, todėl jų reikėtų vengti
- Už sistemos ribų duomenimis dalijamasi paties naudotojo rizika
- Įvykus rimtiems incidentams, susijusiems su programine įranga, nedelsdami kreipkitės į vietos kompetentingą instituciją ir į „Cortrium“ el. pašto adresu support@cortrium.com.

Papildoma informacija

Atkreipkite dėmesį, kad programinės įrangos versijos, rodomos šio vadovo ekrano kopijose, gali būti ankstesnės programinės įrangos versijos.

Pavyzdžiui, jei vartotojo sąsajoje nebuvo atlikta jokių pakeitimų, ekrano kopijose rodoma versija gali būti senesnė nei dabartinė programinės įrangos versija, tačiau funkcijos yra identiškos.

Naudotojams, kurie įjungė integracijas, ekrano kopijos ir naudojimas gali skirtis. Instrukcijas, kaip naudoti

šias integracijas, rasite šio dokumento pabaigoje esančiame I priede.

Kontraindikacijos

„Apex“ negalima naudoti ruošiant pacientus, sergančius gyvybei pavojingomis ligomis, galinčiomis kelti tiesioginį pavojų.

2. Diegimas

- a. „Cortrium Apex“ kvietimą gavote el. paštu. Atidarykite kvietimo el. laišką kompiuteryje, kuriame norite įdiegti „Cortrium Apex“
- b. Spustelėkite kvietimo el. laiške esančią nuorodą, kad nustatytumėte slaptažodį
- c. Patvirtinkite savo slaptažodį
- d. Norėdami tęsti atsisiuntimą, pasirinkite „Go to next step“ (Pereiti prie kito veiksmo)
- e. Atsisiųskite „Windows“ arba „MacOS“ diegimo failą
- f. Kai atsisiuntimas bus baigtas, paleiskite diegimo failą
- g. Baigus diegimą, „Cortrium Apex“ pasileis automatiškai
- h. Dabar galite prisijungti, naudodami savo el. pašto adresą ir atitinkamą slaptažodį bei pradėti naudotis „Cortrium Apex“


Atkreipkite dėmesį, kad „Cortrium Apex“ reikalingas interneto ryšys. Negalėsite prisijungti ar naudotis „Cortrium Apex“ be interneto ryšio

3. Prisijungimas prie „Cortrium Apex“


Norėdami naudotis „Cortrium Apex“, pirmiausia turite turėti naudotojo prisijungimo vardą. Jei esate įstaigos administratorius, tai jums nustatė „Cortrium“. Jei nesate administratorius ir dar neturite naudotojo prisijungimo vardo, jį gali nustatyti jūsų įstaigos administratorius.

Įdiegę „Cortrium Apex“ ir gavę prisijungimo vardą galite atlikti toliau nurodytus veiksmus:

- Paleiskite „Cortrium Apex“ kompiuteryje, dukart spustelėję „Cortrium Apex“ piktogramą.
- Spustelėkite „Sign in“ (Prisijungti) (jei pamiršote slaptažodį, spustelėkite „Forgot your password“ (Pamirštas slaptažodis))

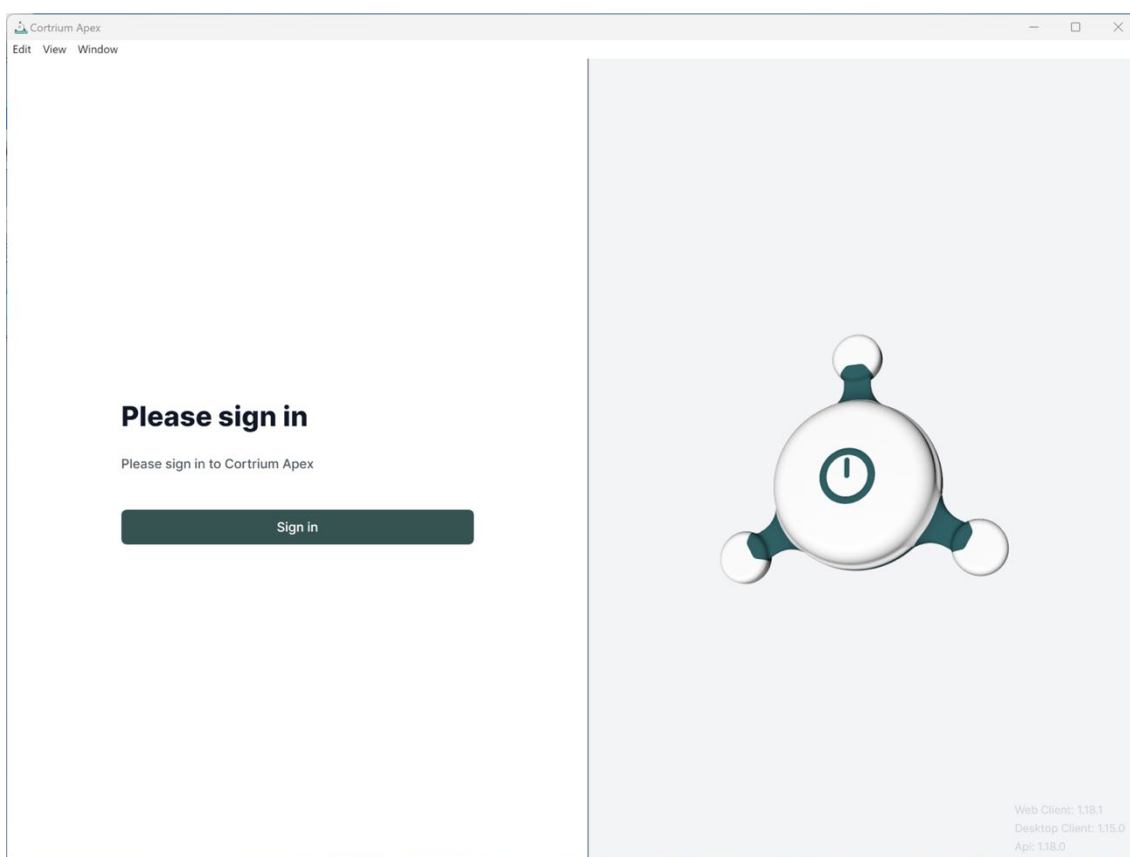

- Įveskite naudotojo informaciją ir paspauskite „Continue“ (Tęsti).

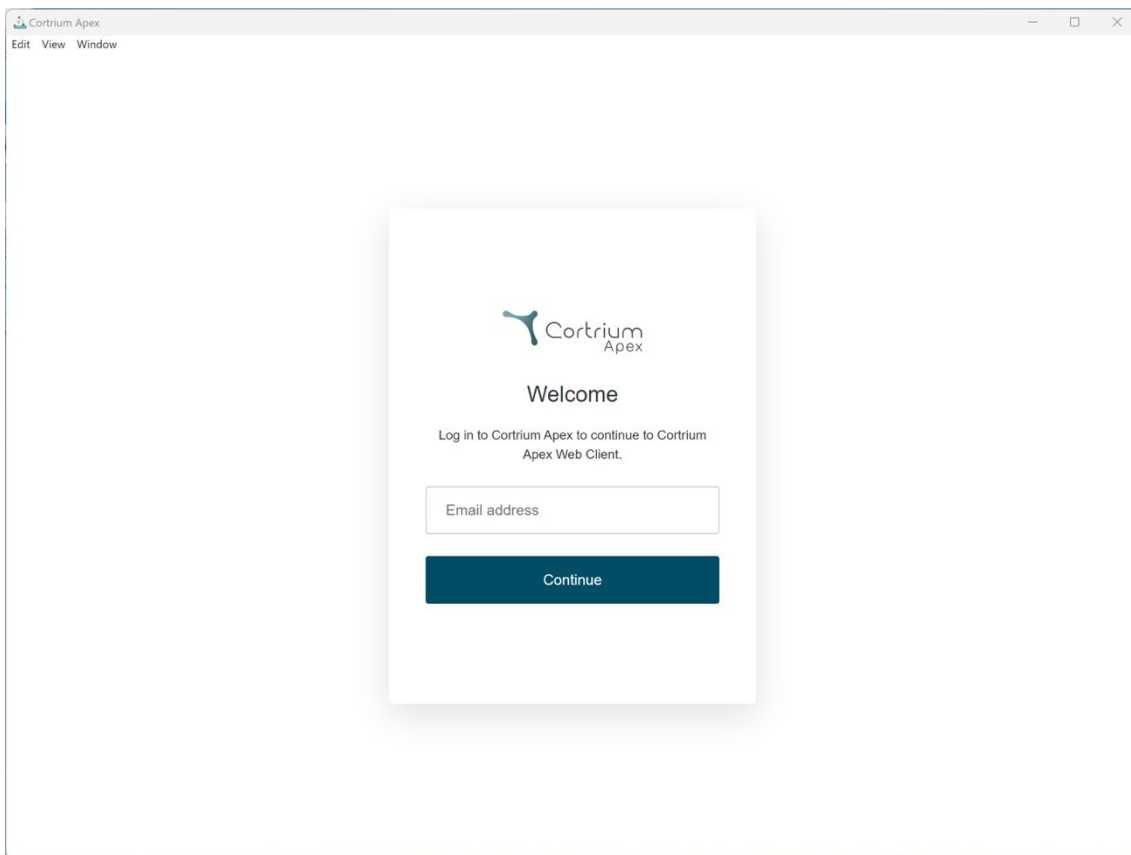

Cortrium Apex

Edit View Window

 Cortrium
Apex

Welcome


Log in to Cortrium Apex to continue to Cortrium
Apex Web Client.

Email address

Continue

3.1 Išlaikykite naudotojus prisijungusius vietiniame kompiuteryje „Cortrium Apex“ sistemoje

- Naudotojai gali likti prisijungę prie sistemos vietoje, jei įjungta OS sauga.

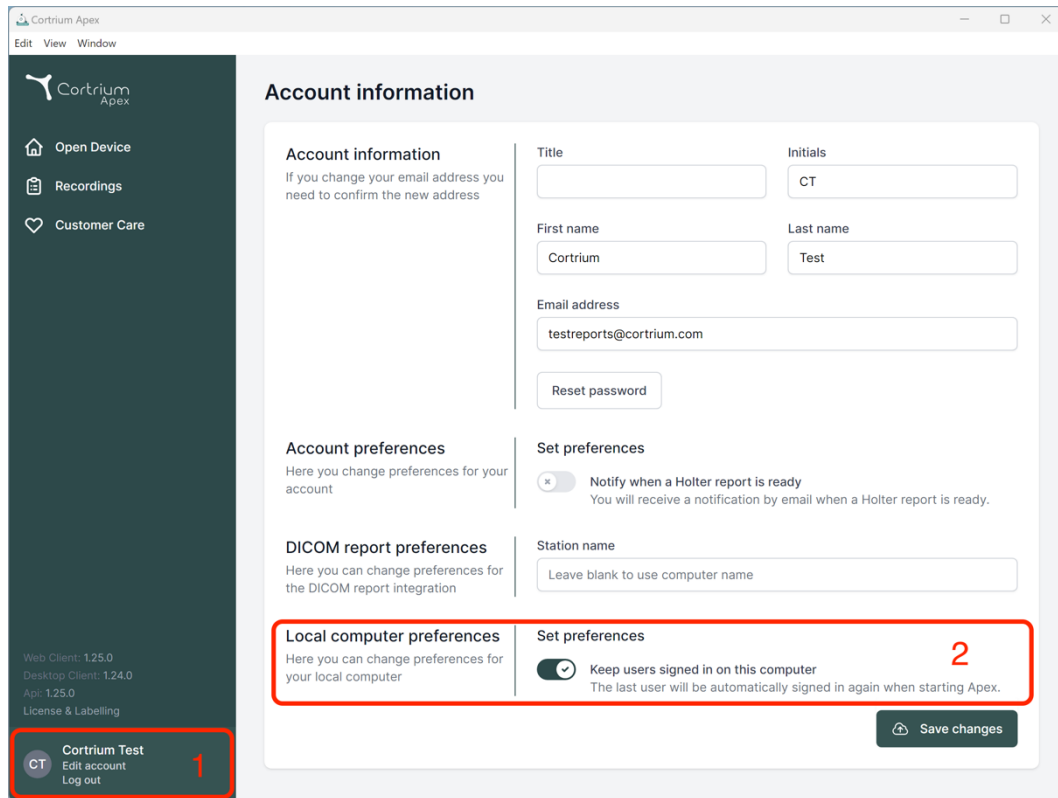

The screenshot displays the Cortrium Apex web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: 'Open Device', 'Recordings', and 'Customer Care'. Below these are version details for Web Client, Desktop Client, and API, along with a 'License & Labelling' link. At the bottom of the sidebar, a user profile for 'Cortrium Test' is shown with options to 'Edit account' and 'Log out', marked with a red '1'. The main content area is titled 'Account information' and contains several sections: 'Account information' with fields for Title, Initials, First name, Last name, and Email address; 'Account preferences' for changing account settings; 'DICOM report preferences' for integration settings; and 'Local computer preferences' for local device settings. The 'Local computer preferences' section includes a 'Set preferences' area with a toggle for 'Keep users signed in on this computer', which is currently turned on and marked with a red '2'. A 'Save changes' button is located at the bottom right of the preferences section.

Account information

If you change your email address you need to confirm the new address

Title: Initials:

First name: Last name:

Email address:

[Reset password](#)

Account preferences

Here you change preferences for your account

Set preferences

☒ **Notify when a Holter report is ready**
You will receive a notification by email when a Holter report is ready.

DICOM report preferences

Here you can change preferences for the DICOM report integration

Station name

Local computer preferences

Here you can change preferences for your local computer

Set preferences

☒ **Keep users signed in on this computer**
The last user will be automatically signed in again when starting Apex.


[Save changes](#)

CT Cortrium Test
Edit account
Log out


4. C3w/C3⁺ paruošimas naujam pacientui

Jei C3w/C3⁺ jau buvo naudotas ilgalaikiai EKG įrašyti, prieš atlikdami šiame skyriuje nurodytus veiksmus perskaitykite skyrių „Holterio ataskaitos užsakymas“.


- Pasirinkite mygtuką „Open Device“ (Atidaryti įrenginį).

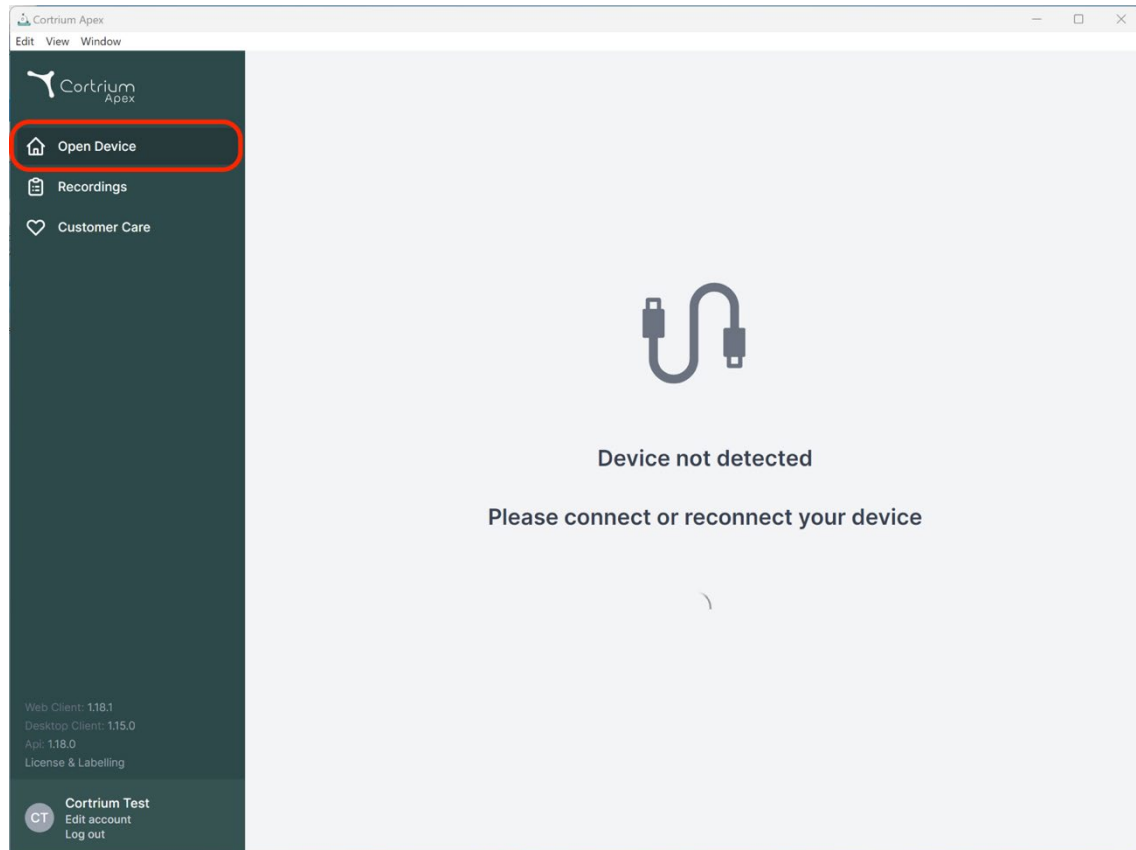

- Prijunkite C3w/C3⁺ prie kompiuterio, naudodami pridedamą USB laidą.
(Jei naudojate „Apple“ gaminį, gali prireikti USB keitiklio)

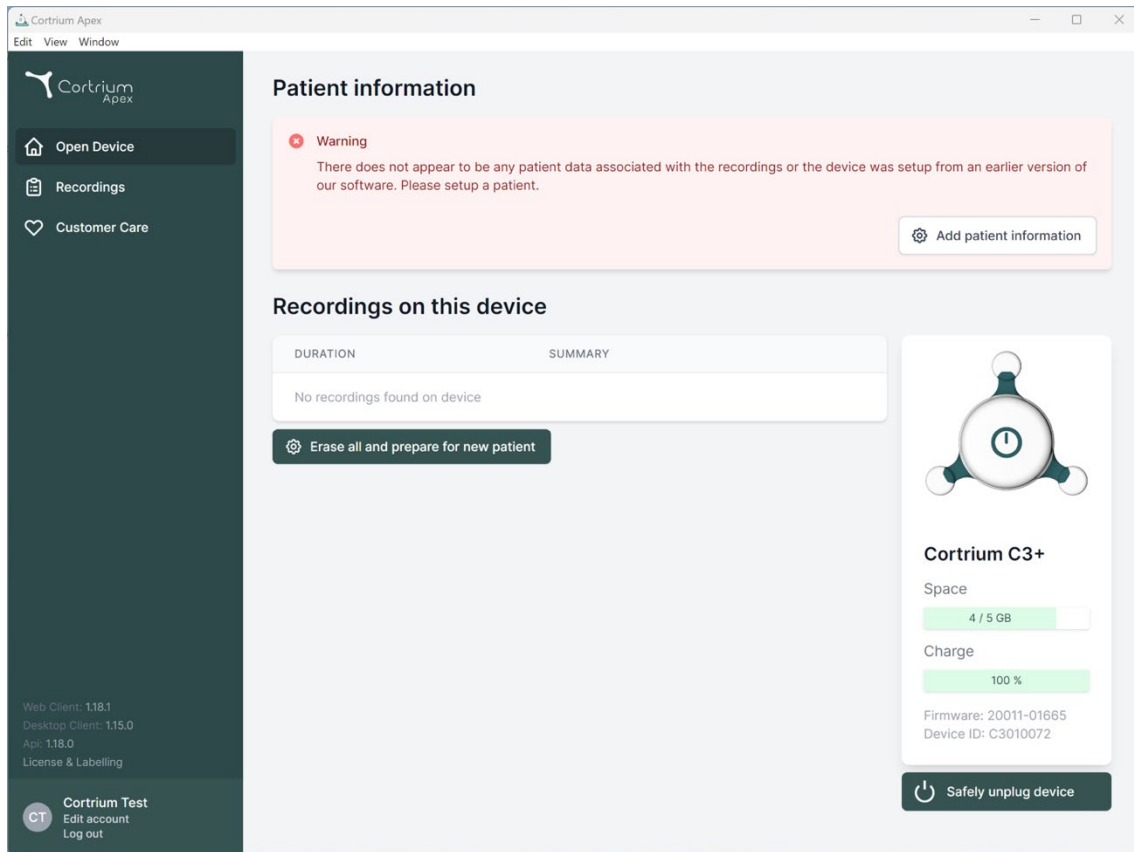

- „Cortrium Apex“ rodo informaciją apie prijungtą įrenginį ir visus jame saugomus duomenis.
- Pasirinkite „Erase all and prepare device for new patient“ (Ištrinti viską ir paruošti įrenginį naujam pacientui).
- Užpildykite atitinkamą paciento ir įrašymo informaciją:

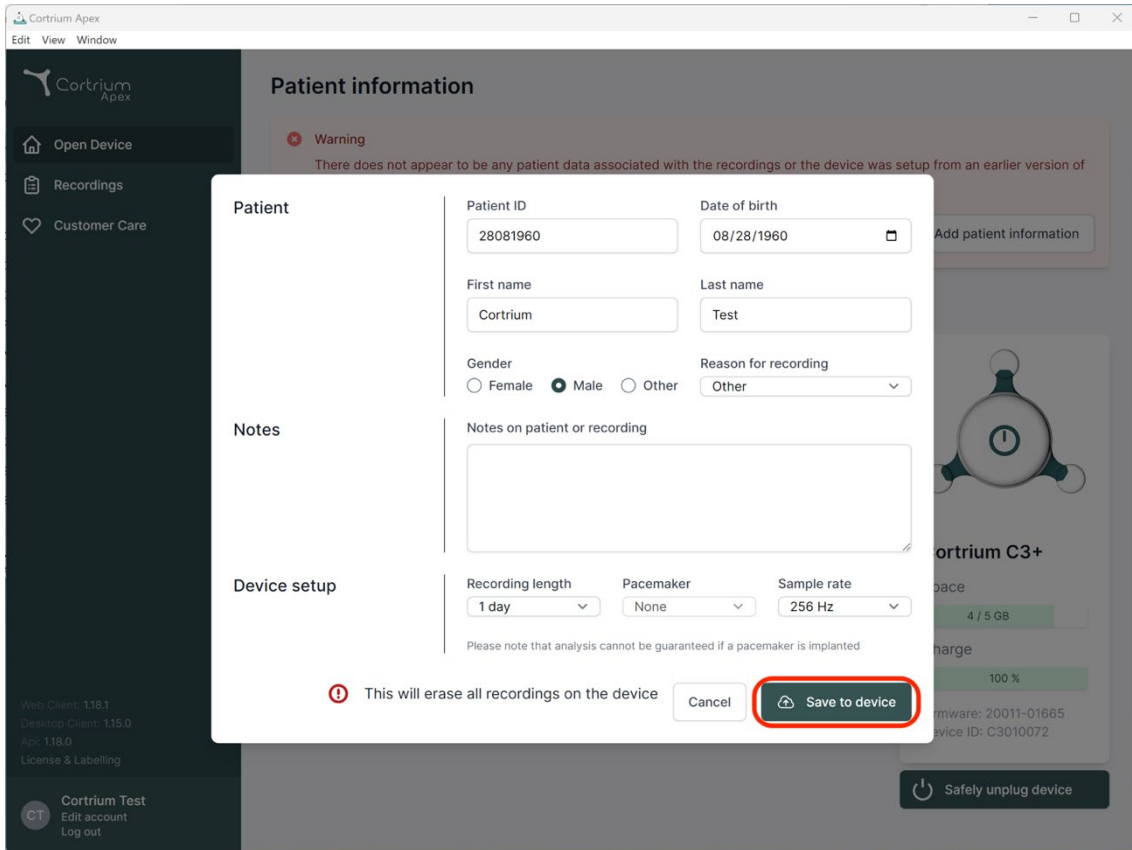

Patient information

Warning
There does not appear to be any patient data associated with the recordings or the device was setup from an earlier version of

Patient

Patient ID: 28081960 Date of birth: 08/28/1960

First name: Cortrium Last name: Test

Gender: ☐ Female ☒ Male ☐ Other Reason for recording: Other

Notes

Notes on patient or recording

Device setup

Recording length: 1 day Pacemaker: None Sample rate: 256 Hz

Please note that analysis cannot be guaranteed if a pacemaker is implanted

Buttons: Cancel, Save to device


Footer: Web Client: 1.18.1 Desktop Client: 1.15.0 App: 1.18.0 License & Labelling Cortrium Test Edit account Log out

- Dabar spustelėkite „Save to Device“ (Išsaugoti įrenginyje). Taip ištrinami visi prietaise išsaugoti paciento duomenys ar įrašai ir sistemoje išsaugoma nauja paciento informacija.
- Dabar galite atjungti prietaisą, naudodami dešinėje pusėje esantį mygtuką „Safely unplug device“ (Saugiai atjungti prietaisą).
- Dabar C3w/C3+ yra paruoštas įrašyti naujo paciento duomenis.
- Jei įvedėte neteisingą paciento informaciją, ją galima redaguoti spustelėjus „Edit patient information“ (Redaguoti paciento informaciją).

5. Holterio ataskaitos užsakymas


„Cortrium Apex“ leidžia siųsti įrašus analizei ir atsisiųsti Holterio tyrimo ataskaitą, kai tik ji prieinama. Kai prietaisas grąžinamas su įrašu, spustelėkite prietaiso atidarymo mygtuką ir pasirinkite kitus veiksmus, naudodami mygtuką „Actions“ (Veiksmai). Pagal numatytuosius nustatymus galite pasirinkti šias dvi parinktis:

- Užsakyti Holterio ataskaitą
- Įkelti ir eksportuoti kaip EDF

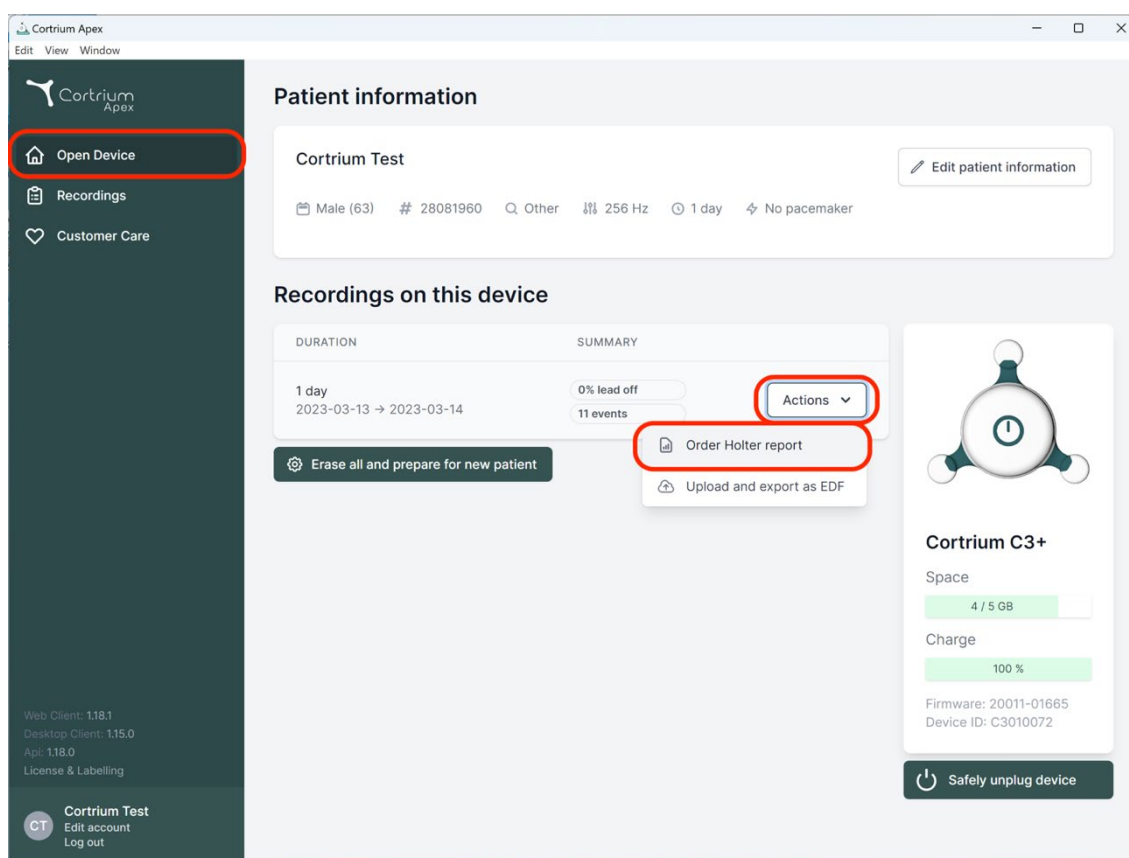

Norėdami užsakyti Holterio ataskaitą, spustelėkite mygtuką „Actions“ (Veiksmai) ir tada „Order Holter report“ (Užsakyti Holterio ataskaitą).

Bus parodyta forma, kurioje galėsite patvirtinti užsakymą arba pasirinkti papildomas analizės parinktis.

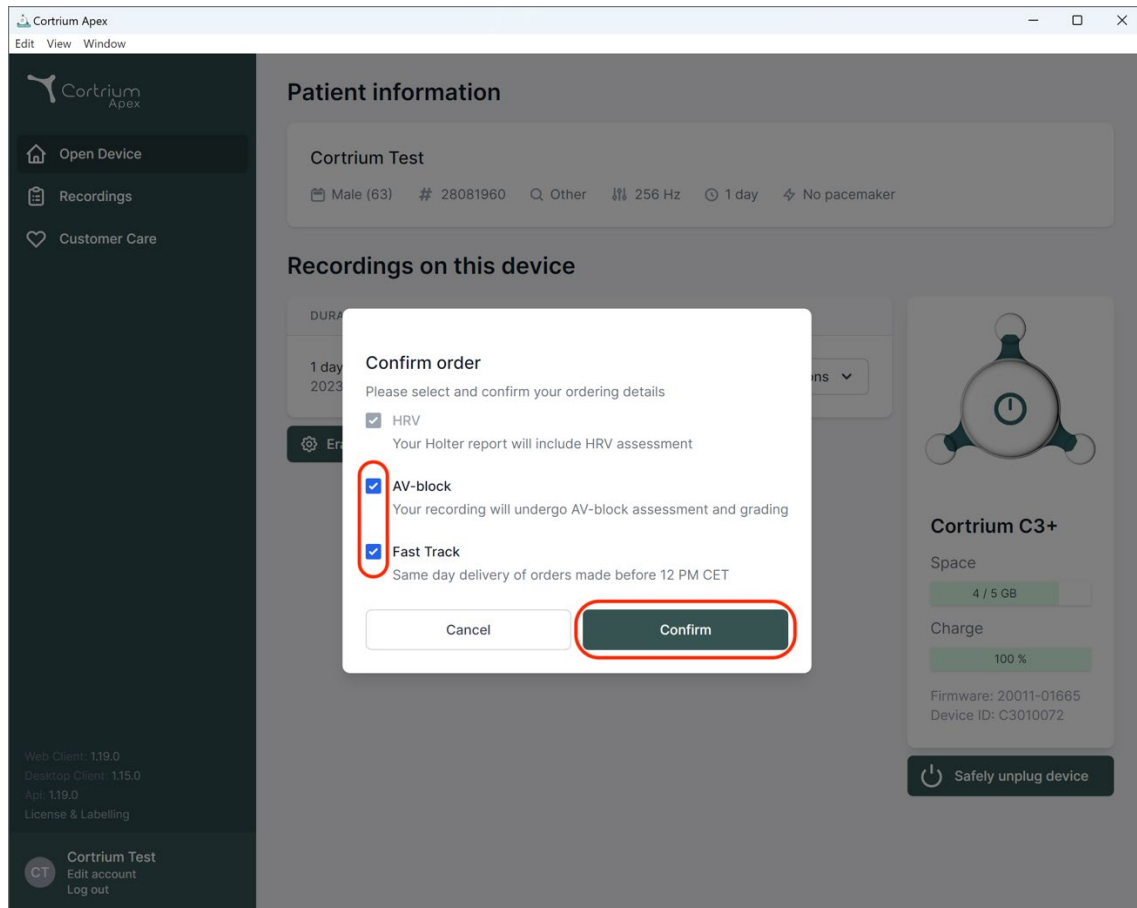


Jūsų priedų galimybės yra šios:

- ŠDK: jūsų Holterio ataskaitoje bus įtrauktas širdies dažnio kintamumo (ŠDK) įvertinimas
- AV blokas: vyresniojo specialisto atliekamas AV blokados įvertinimas ir rezultatas
- Spartusis pristatymas: užsakymai, pateikti iki 12 val. CET, pristatomi tą pačią dieną


Kai būsite patenkinti pasirinktomis analizės parinktimis, galite spustelėti „Confirm“ (Patvirtinti), kad tęstumėte.

Jei pasirinkote analizės priedus, bus parodytas pranešimas, informuojantis, ar jūsų pasirinkimai nesudarys papildomų mokesčių.

Norėdami tęsti, spustelėkite „Confirm“ (Patvirtinti).

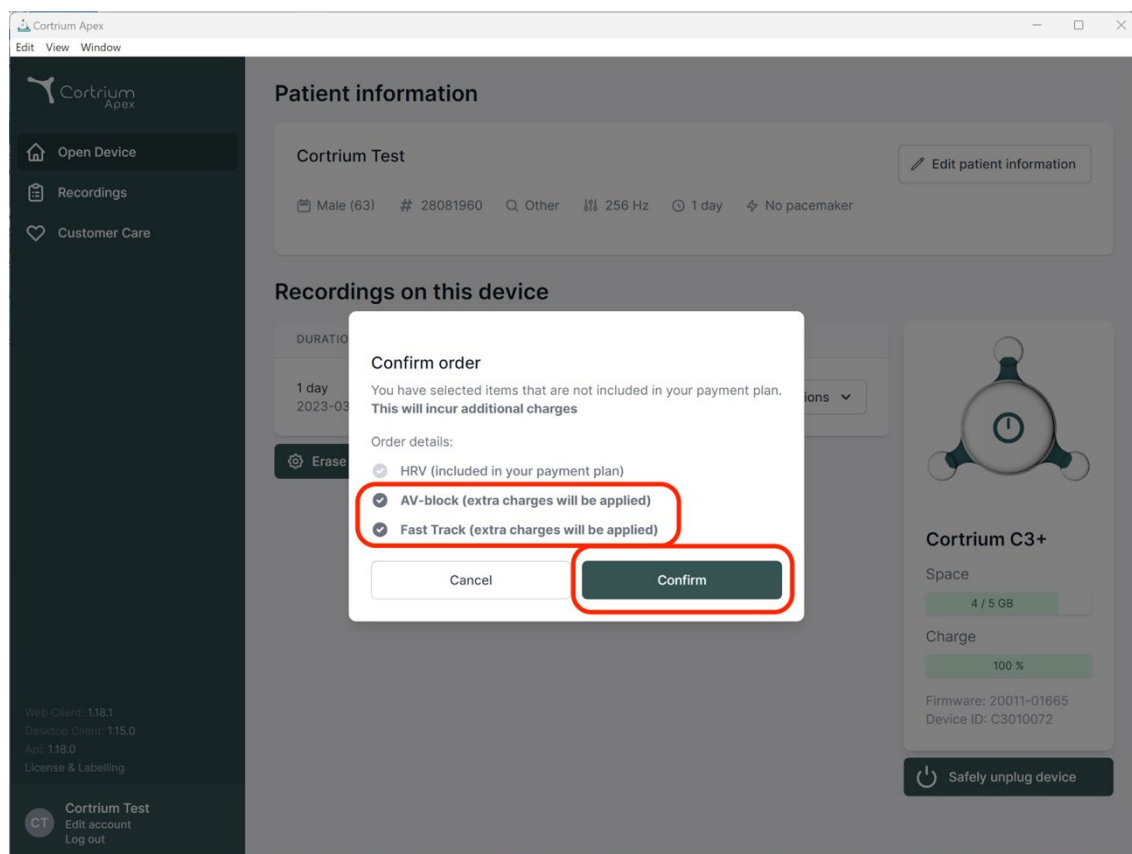

Dabar įrašas įkeliamas.

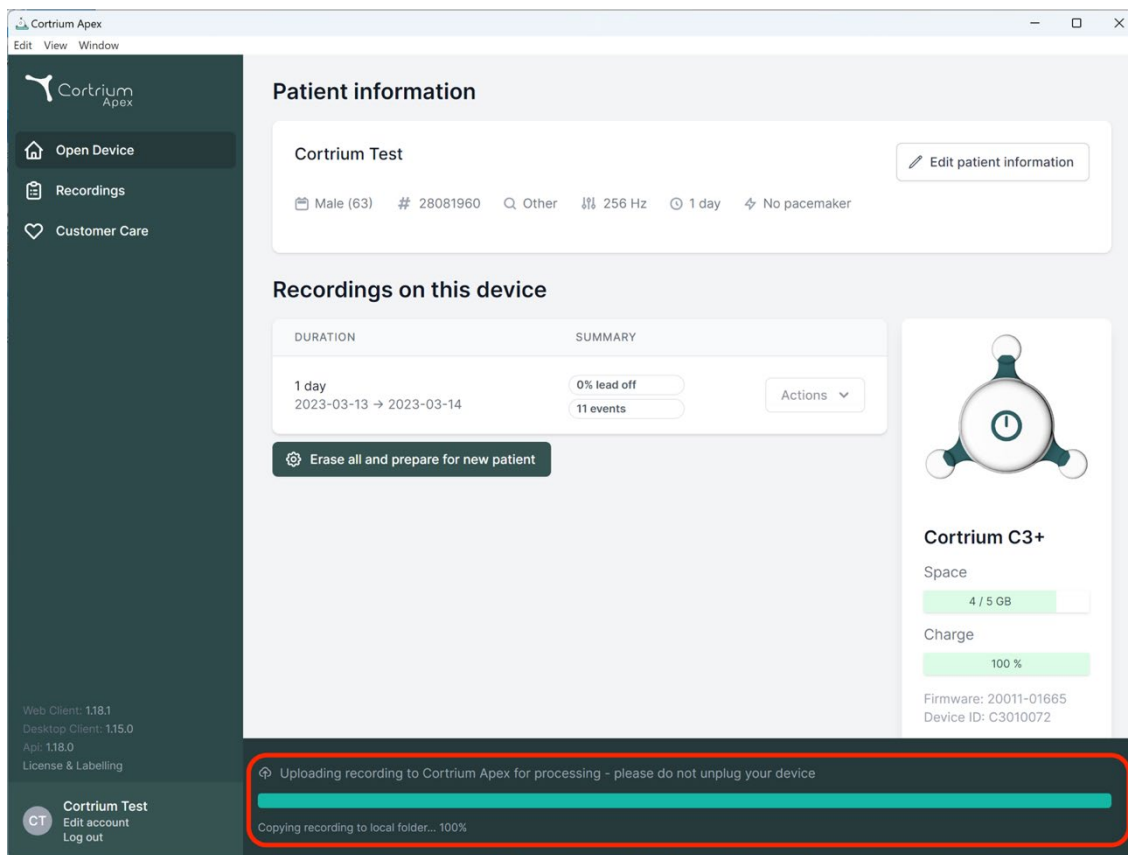

The screenshot shows the Cortrium Apex web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: 'Open Device', 'Recordings', and 'Customer Care'. Below these are version details: 'Web Client: 1.18.1', 'Desktop Client: 1.15.0', 'Api: 1.18.0', and 'License & Labelling'. At the bottom of the sidebar is a user profile for 'Cortrium Test' with options to 'Edit account' and 'Log out'. The main content area is titled 'Patient information' and displays data for 'Cortrium Test', including 'Male (63)', ID '28081960', 'Other' category, '256 Hz' sampling rate, '1 day' duration, and 'No pacemaker'. An 'Edit patient information' button is present. Below this is the 'Recordings on this device' section, showing a table with columns 'DURATION' and 'SUMMARY'. A recording for '1 day' (2023-03-13 to 2023-03-14) is listed with '0% lead off' and '11 events'. An 'Actions' dropdown menu is next to it. A button 'Erase all and prepare for new patient' is below the table. To the right of the table is a device status card for 'Cortrium C3+' showing 'Space: 4 / 5 GB', 'Charge: 100 %', 'Firmware: 20011-01665', and 'Device ID: C3010072'. At the bottom, a red-bordered box highlights a status message: 'Uploading recording to Cortrium Apex for processing - please do not unplug your device' with a progress bar and 'Copying recording to local folder... 100%'.

Įkėlus įrašą, išanalizuota Holterio ataskaita bus prieinama. Įrenginį jau galima paruošti naujam pacientui, kai tik įkeliamas įrašas.

Atsižvelgiant į paskyros nustatymus, jums bus pranešta el. paštu, kai Holterio ataskaita bus paruošta peržiūrai. „Apex“ taip pat pateikia naujai užpildytas ataskaitas su raudonu tašku, kad būtų lengviau jas atpažinti.

Kitame skyriuje paaiškinta, kaip peržiūrėti Holterio ataskaitą, kai tik ji išanalizuojama, ir kaip peržiūrėti visą įrašą iškart po įkėlimo.

6. Holterio ataskaitų ir viso įrašo peržiūra

„Cortrium Apex“ galite peržiūrėti Holterio ataskaitas PDF formatu, o visą įrašą galite peržiūrėti iškart po to, kai jis įkeliamas analizei. Toliau aprašyta, kaip peržiūrėti Holterio ataskaitas, o kaip naudotis įrašų peržiūros programa paaiškinta 6.2 skyriuje.


6.1 Holterio ataskaitų peržiūra

Išanalizavus įrašą, Holterio ataskaitą galima peržiūrėti PDF formatu.

Norėdami tai padaryti, eikite į meniu elementą „Recordings“ (Įrašai) ir spustelėkite atitinkamą pacientą.

Tada galite peržiūrėti

PDF ataskaitą paskutinėje eilutėje prie Holterio ataskaitos. Holterio ataskaita bus atidaryta jūsų interneto naršyklėje.

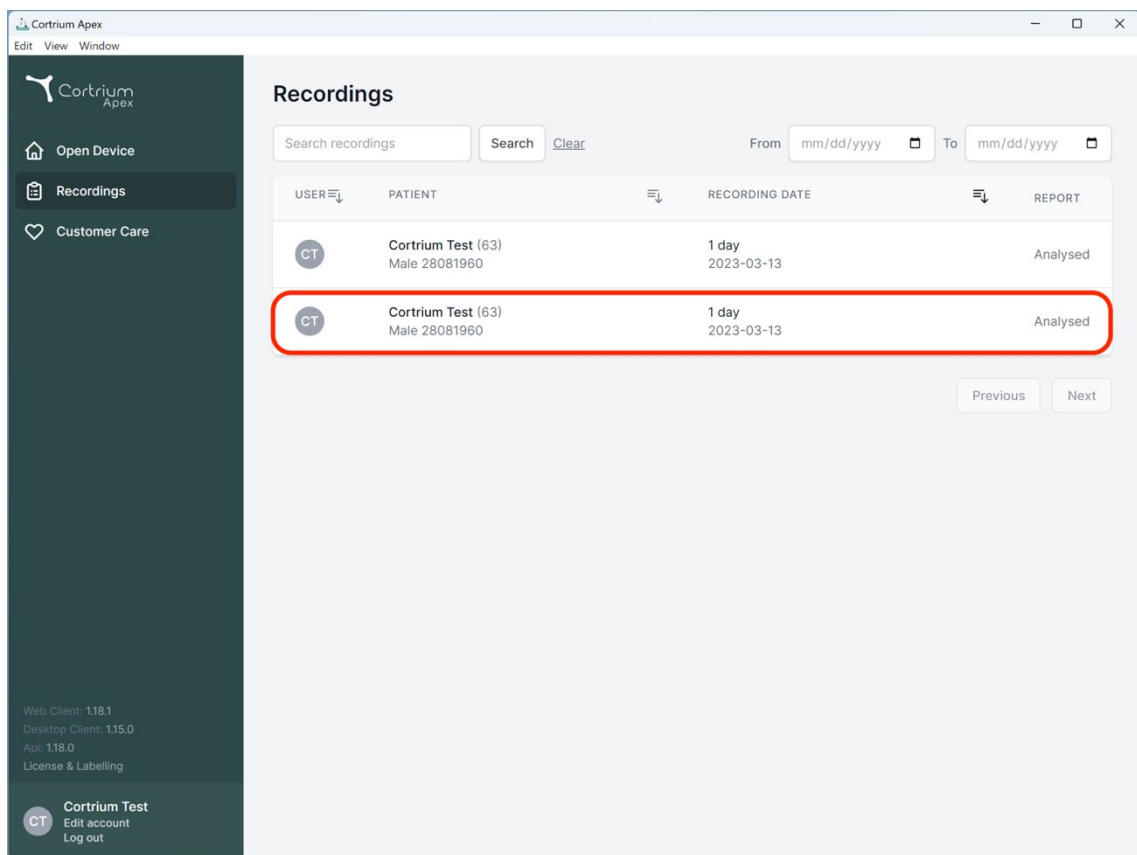

The screenshot displays the 'Recordings' section of the Cortrium Apex web application. On the left is a dark sidebar with navigation options: 'Open Device', 'Recordings' (selected), and 'Customer Care'. The main area shows a table of recordings. The second row is highlighted with a red border.

USER	PATIENT	RECORDING DATE	REPORT
CT	Cortrium Test (63) Male 28081960	1 day 2023-03-13	Analysed
CT	Cortrium Test (63) Male 28081960	1 day 2023-03-13	Analysed

At the bottom of the sidebar, there is a footer with version information: 'Web Client: 1.18.1', 'Desktop Client: 1.15.0', 'App: 1.18.0', and 'License & Labelling'. At the very bottom of the sidebar, there is a 'Cortrium Test' section with 'Edit account' and 'Log out' links.

Cortrium Apex

Edit View Window



[Open Device](#)

[Recordings](#)

[Customer Care](#)

Web Client: 1.18.1
Desktop Client: 1.15.0
App: 1.18.0
License & Labelling

CT

Cortrium Test

Edit account
Log out

Recording details

Delete recording

Cortrium Test

Male

1960-08-28 (63)

28081960

Other

Edit

Uploaded By

Cortrium Test

Cortrium Internal > Cortrium

2024-01-30 12:31

Recording Summary

1 day

11 events

No pacemaker

0.0% lead off

2023-03-13 11:54

256 Hz

C3100175

View recording

View >

Download recording in .EDF format

Download

Holter Reports

Order Holter report

Ordered: 2024-02-16 07:36
Delivered: 2024-02-16 13:00


Features ordered:
☒ HRV ☐ AV-block ☐ Fast Track

Edit report

PDF

6.2 Įrašų peržiūros programa

Norėdami peržiūrėti visą įrašą po įkėlimo, spustelėkite įrašus ir pasirinkite pacientą, kurio įrašą norite peržiūrėti (žr. pirmąją ekrano nuotrauką 6.1 skirsnyje). Dabar galite naudoti įrašo peržiūrą, paspausdami mygtuką „View“ (Peržiūrėti).

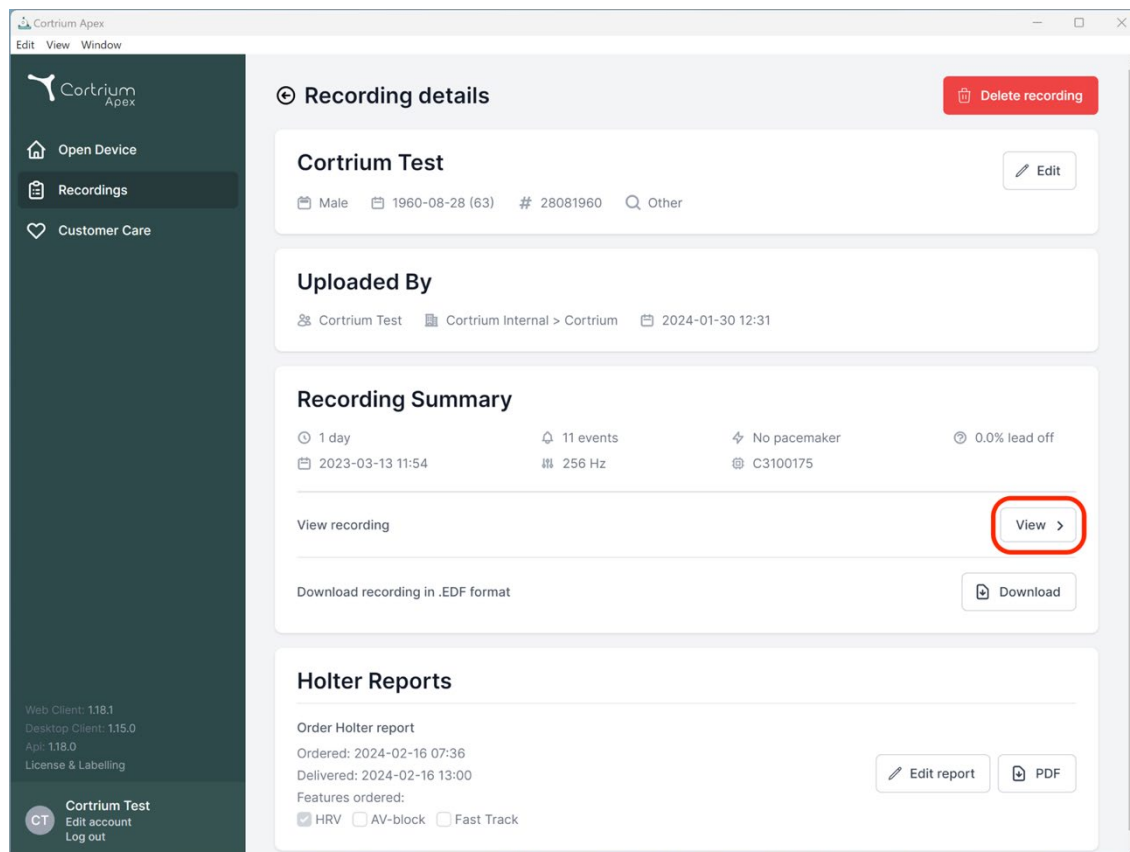


Atidaroma įrašo peržiūros programa.

- Peržiūros programa įkelia 1 minutės duomenis ir vienu metu rodo 7 sekundes EKG.
- Naudodamiesi paryškintomis interaktyviosiomis funkcijomis galite pasirinkti dieną, valandą, minutę ir sekundę, kurias norite matyti įrašė. Pasirinkite laiką ir spustelėkite paieškos piktogramą, norėdami patvirtinti nustatymą.
- Laikydami ir vilkdami peržiūros programos apačioje esančią šviesiai mėlyną juostą galite peržiūrėti 60 sekundžių aplink pasirinktą laiko tašką.
- Spustelėdami naršymo rodykles arba vilkdami vaizdą prie krašto galite judėti įrašė pirmyn ir atgal.
- Be to, jei signalo amplitudė maža, galite ją padidinti, naudodami priartinimo funkciją.

Recording viewer

2023-03-13 11:54 → 2023-03-14 11:55 1 day

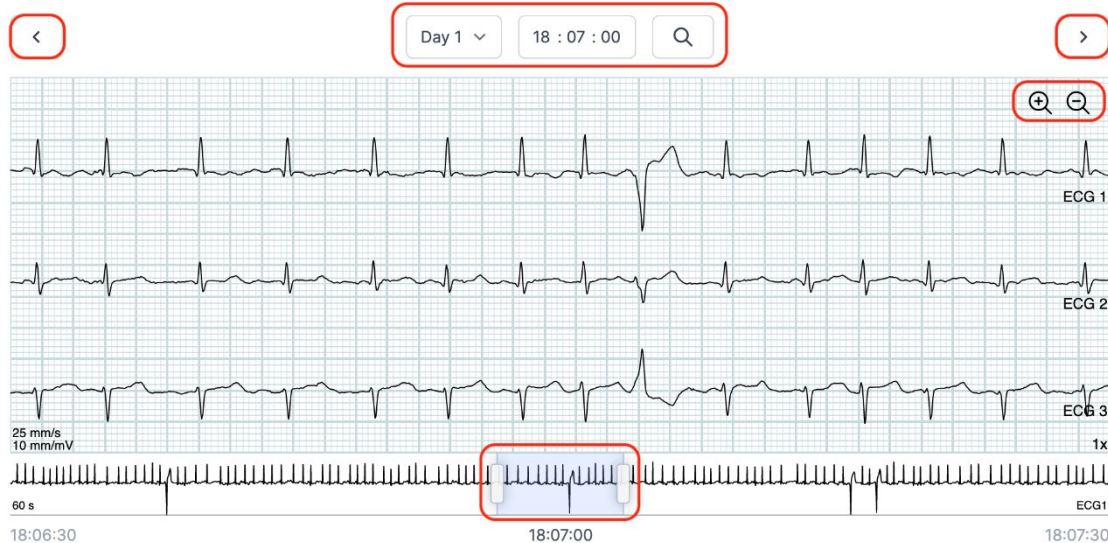

Norėdami uždaryti įrašų peržiūros programą, spustelėkite „x“ viršutiniame dešiniajame kampe.

6.3 Santraukos redaktorius

Gavę ataskaitą, galite redaguoti santrauką, jei norite įtraukti konkrečią formuluotę ar informaciją.

Norėdami tai padaryti, spustelėkite įrašus ir pasirinkite pacientą, kurio ataskaitos santrauką norite redaguoti.


Dabar galite naudoti santraukos redaktorių, paspausdami mygtuką „Edit report“ (Redaguoti ataskaitą) paskutinėje eilutėje ties Holterio ataskaita.

7. Paciento duomenų redagavimas ir įrašų peržiūra

Pasirinkę meniu punktą „Recordings“ (Įrašai) galite spustelėti įrašą ir atverti santrauką su susijusia informacija.


Įrašų santraukoje pateikiama tokia informacija:

- Įrašo trukmė
- Pradžios data ir laikas
- Laidų atjungimas, t. y. laikotarpiai, kai elektrodai nesiliečia su kūnu
- Įvykiai, kai pacientas paspaudė mygtuką, kad nurodytų simptomus arba įvykį
- EKG signalo diskretizavimo dažnis
- Informacija apie širdies stimuliatorių, jei ji buvo užfiksuota ruošiant prietaisą naujam pacientui

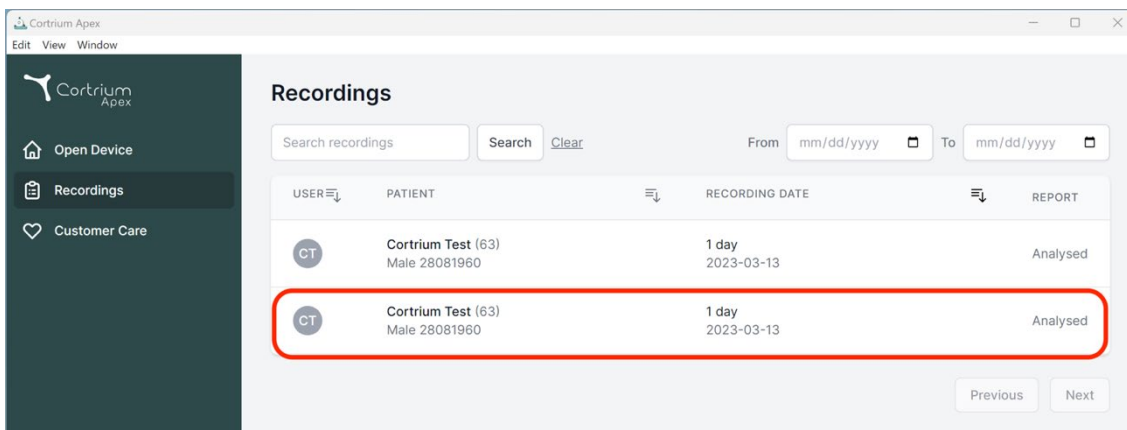

USER	PATIENT	RECORDING DATE	REPORT
CT	Cortrium Test (63) Male 28081960	1 day 2023-03-13	Analysed
CT	Cortrium Test (63) Male 28081960	1 day 2023-03-13	Analysed

Paciento informaciją galima redaguoti paspaudus mygtuką „Edit“ (Redaguoti).

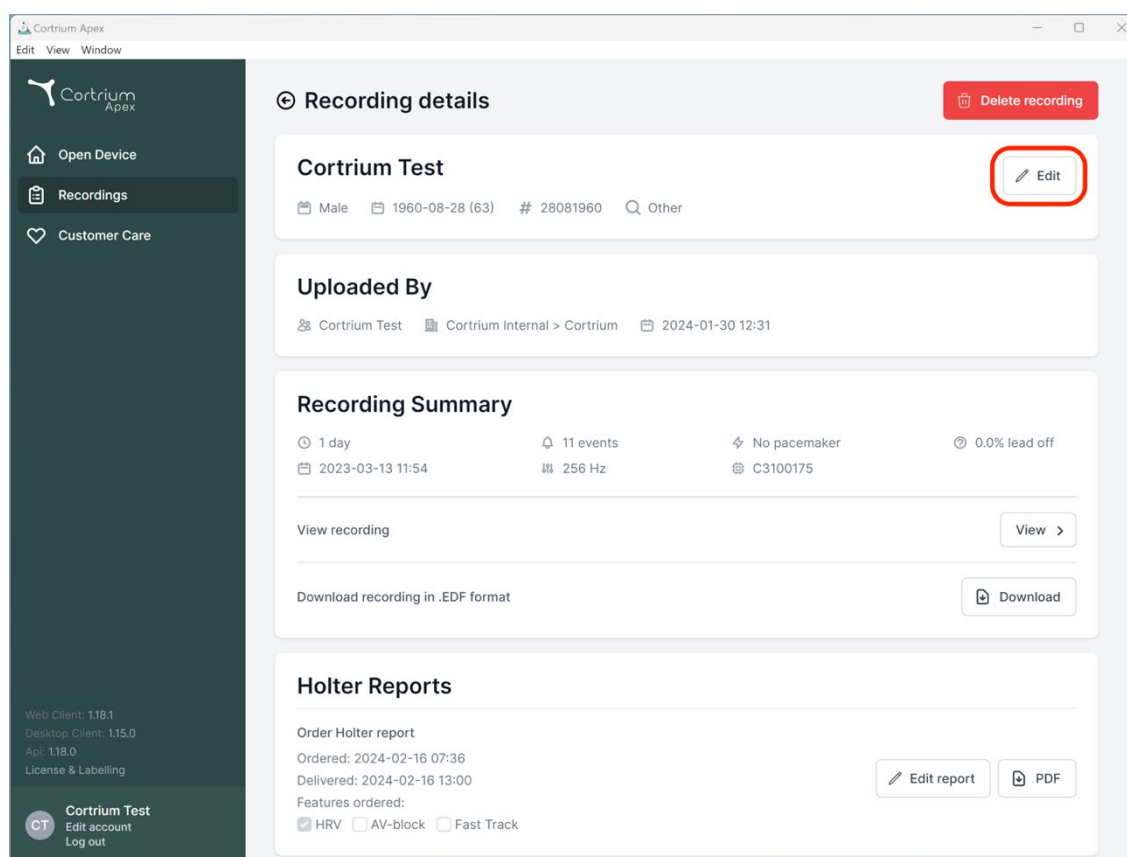

Recording details

Cortrium Test Edit

Male 1960-08-28 (63) # 28081960 Other

Uploaded By

Cortrium Test Cortrium Internal > Cortrium 2024-01-30 12:31

Recording Summary

1 day 11 events No pacemaker 0.0% lead off
2023-03-13 11:54 256 Hz C3100175

View recording View >

Download recording in .EDF format Download

Holter Reports

Order Holter report

Ordered: 2024-02-16 07:36
Delivered: 2024-02-16 13:00

Features ordered:
☒ HRV ☐ AV-block ☐ Fast Track

Edit report PDF

Koregavimus galima išsaugoti paspaudus mygtuką „Save“ (Išsaugoti).

Cortrium Apex
Edit View Window

Cortrium Apex

Open Device

Recordings

Customer Care

Recording details

Cortrium Test Edit

Male 1960-08-28 (63) # 28081960 Other

Patient

Patient ID: 28081960 Date of birth: 08/28/1960

First name: Cortrium Last name: Test

Gender: ☐ Female ☒ Male ☐ Other Reason for recording: Other

Notes

Notes on patient or recording

Cancel Save

Web Client: 118.1
Desktop Client: 115.0
App: 118.0
License & Labelling

CT Cortrium Test
Edit account
Log out

Order Holter report

Ordered: 2024-02-16 07:36
Delivered: 2024-02-16 13:00

Features ordered:
☒ HRV ☐ AV-block ☐ Fast Track

0.0% lead off

View >



Download

Edit report PDF

Delete recording

8. Įrašo ištrynimasis

Jei norite ištrinti įrašą, atidarykite skyrių „Recordings“ (Įrašai) ir spustelėkite įrašą, kurį norite ištrinti. Tada viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite „Delete recording“ (Ištrinti įrašą). Įvedus paciento vardą, ištrynimą reikia patvirtinti paspaudžiant „Delete“ (Ištrinti).

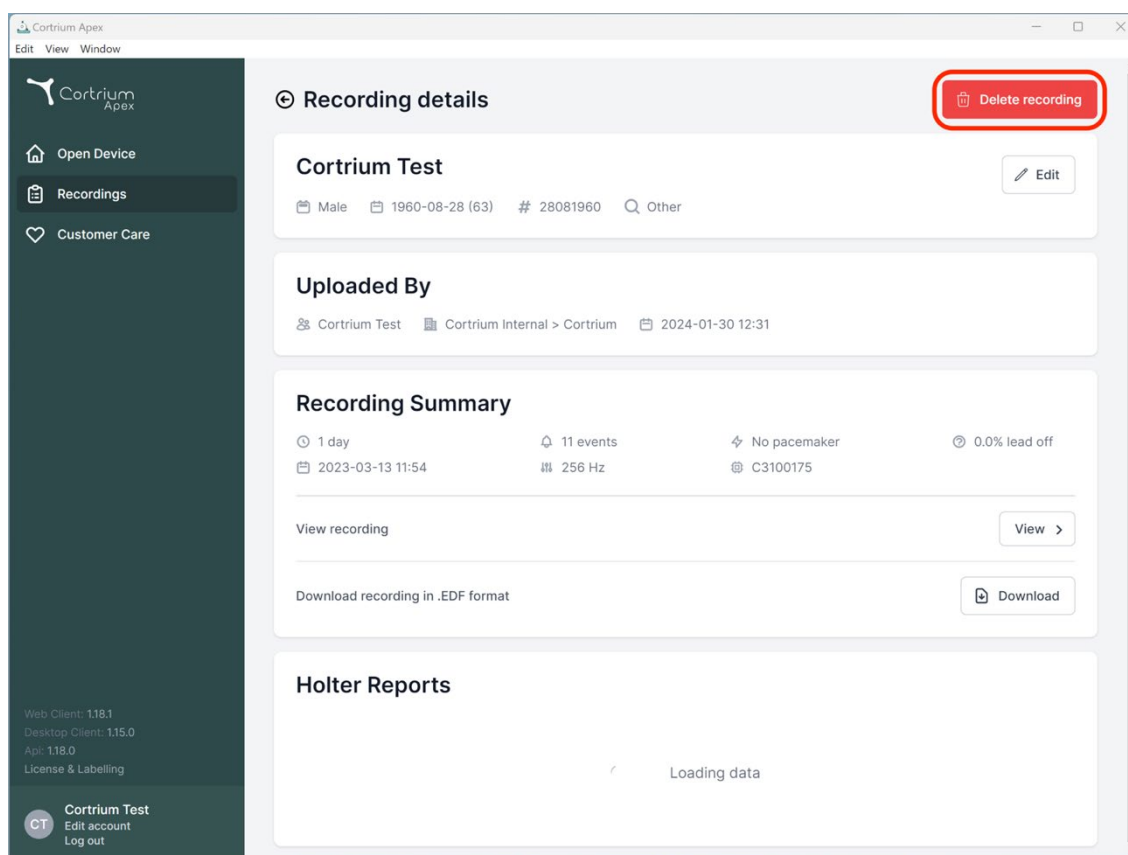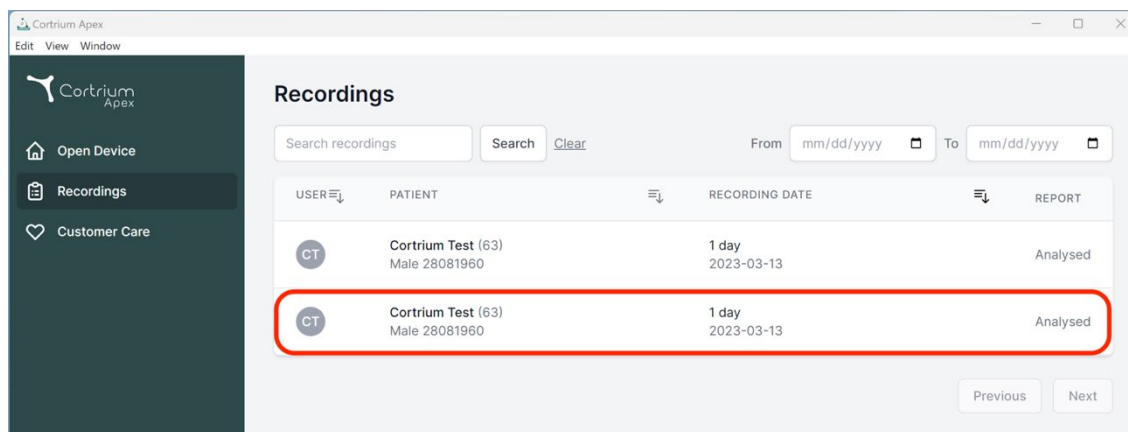

Cortrium Apex

Edit View Window

Open Device

Recordings

Customer Care

Web Client: 118.1

Desktop Client: 115.0

App: 118.0

License & Labelling

CT Cortrium Test

Edit account

Log out

Recording details

Delete recording

Cortrium Test

Edit

Male 1960-08-28 (63) # 28081960 Other

Uploaded By

Cortrium Test Cortrium Internal > Cortrium 2024-01-30 12:31

Confirm delete

You are removing Cortrium Test

To confirm delete, please write 'Cortrium Test' in the input field

Cortrium Test

Cancel Delete

Download recording in .EDF format

Download

Holter Reports

Loading data


9. EDF failo atsisiuntimas

EDF failą galima atsisiųsti prieš užsakant Holterio ataskaitą arba po to. Šie du skirtingi atvejai aprašyti kituose skyriuose.


9.1 Kaip atsisiųsti EDF failą prieš užsakant Holterio ataskaitą

Norėdami konvertuoti įrašą į EDF formatą, atlikite šiuos veiksmus:

- Prijunkite C3w/C3+ Holterio monitorių prie kompiuterio ir paspauskite kairiajame meniu esantį mygtuką „Open Device“ (Atidaryti įrenginį).
- Spustelėkite mygtuką „Actions“ (Veiksmai) ir pasirinkite „Upload and export as EDF“ (Įkelti ir eksportuoti kaip EDF).

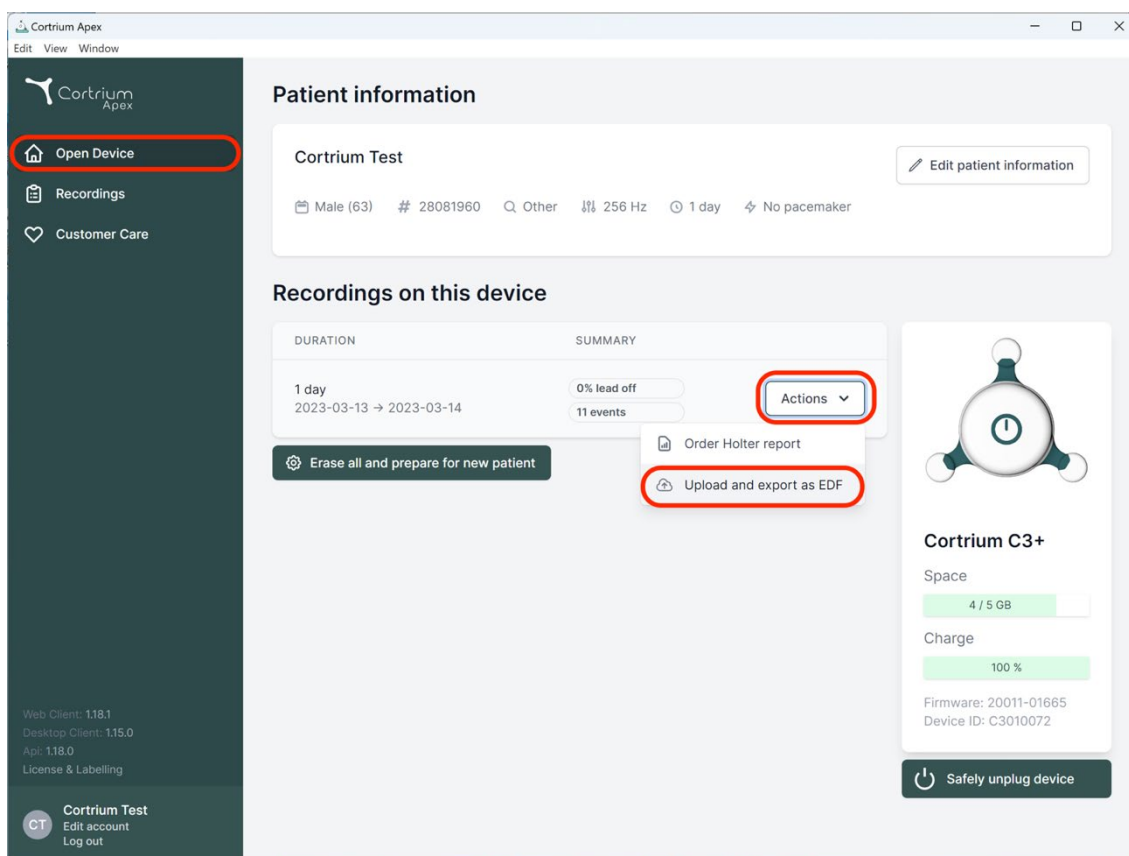

- Įrašas perkeliamas į „Apex“.
- Kai perdavimas baigiamas, mygtukas „Actions“ (Veiksmai) pasikeičia į „View“ (Peržiūrėti).

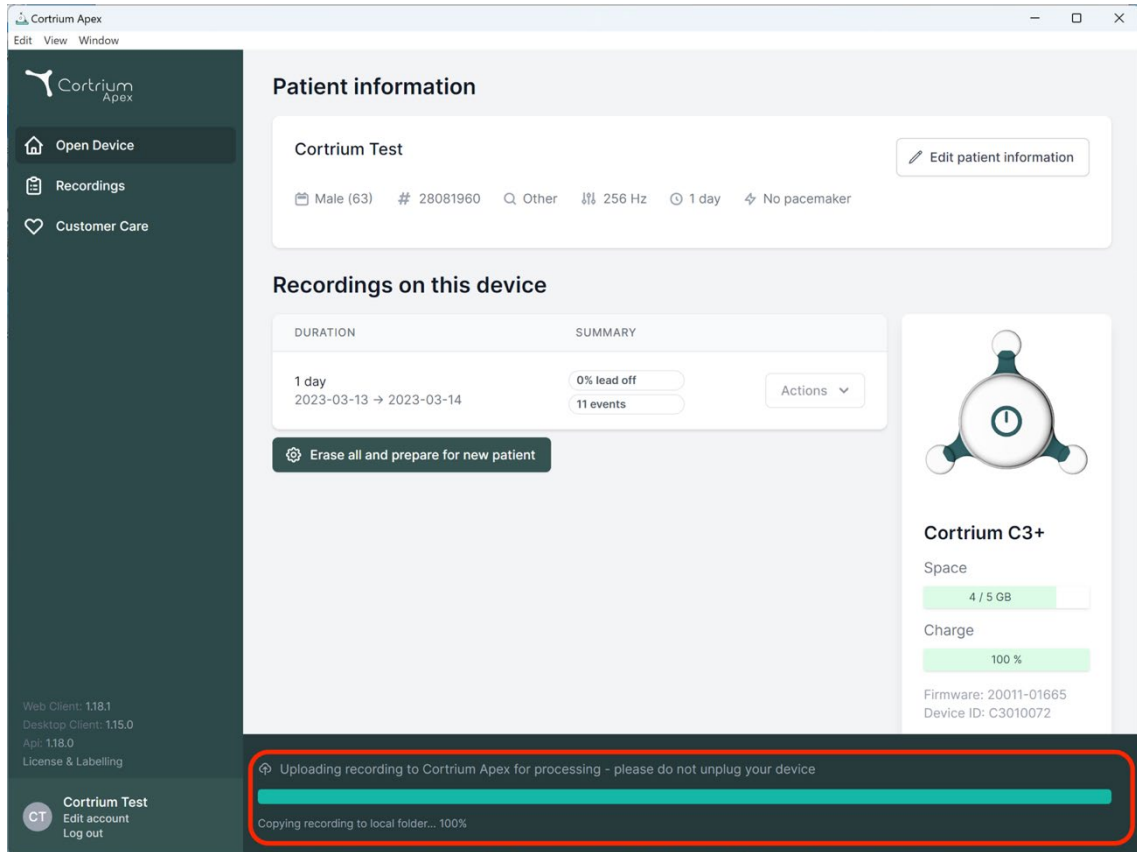

Cortrium Apex
Edit View Window

Patient information

Cortrium Test [Edit patient information](#)

Male (63) # 28081960 Q Other 256 Hz 1 day No pacemaker

Recordings on this device

DURATION	SUMMARY	
1 day 2023-03-13 → 2023-03-14	0% lead off 11 events	Actions

[Erase all and prepare for new patient](#)

Cortrium C3+

Space
4 / 5 GB

Charge
100 %


Firmware: 20011-01665
Device ID: C3010072

Uploading recording to Cortrium Apex for processing - please do not unplug your device

Copying recording to local folder... 100%

Web Client: 118.1
Desktop Client: 115.0
App: 118.0
License & Labelling

Cortrium Test
Edit account
Log out

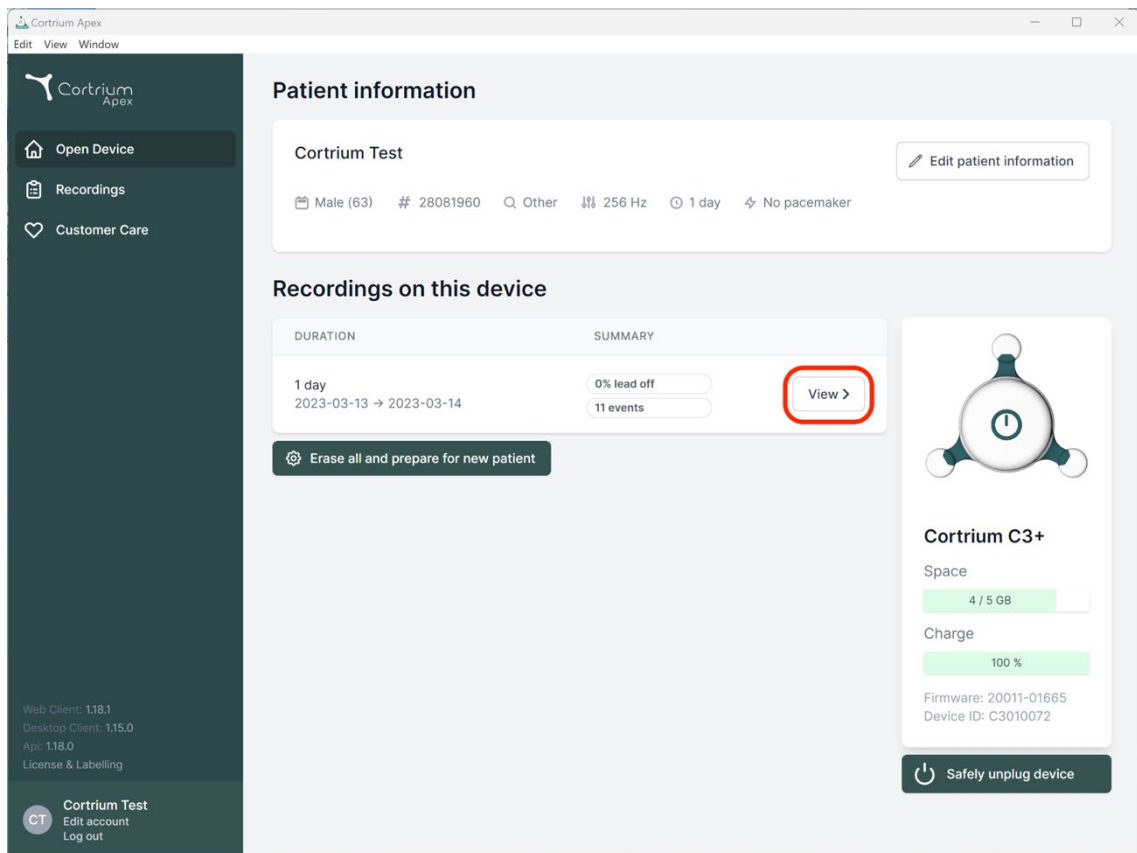

Cortrium Apex
Edit View Window

Patient information

Cortrium Test [Edit patient information](#)

Male (63) # 28081960 Q Other 256 Hz 1 day No pacemaker

Recordings on this device

DURATION	SUMMARY	
1 day 2023-03-13 → 2023-03-14	0% lead off 11 events	View >

[Erase all and prepare for new patient](#)

Cortrium C3+

Space
4 / 5 GB

Charge
100 %

Firmware: 20011-01665
Device ID: C3010072


[Safety unplug device](#)

Web Client: 118.1
Desktop Client: 115.0
App: 118.0
License & Labelling

Cortrium Test
Edit account
Log out

- Norėdami peržiūrėti įrašo apžvalgą, spustelėkite mygtuką „View“ (Peržiūrėti).

- Ties antriniu elementu „Download report in EDF format“ (Atsisiųsti ataskaitą EDF formatu) rodoma ši informacija:
 - Konvertuojant įrašą, rodoma eiga
 - Kai EDF failas paruoštas, spustelėkite mygtuką „Download“ (Atsisiųsti), kad išsaugotumėte EDF failą savo kompiuteryje

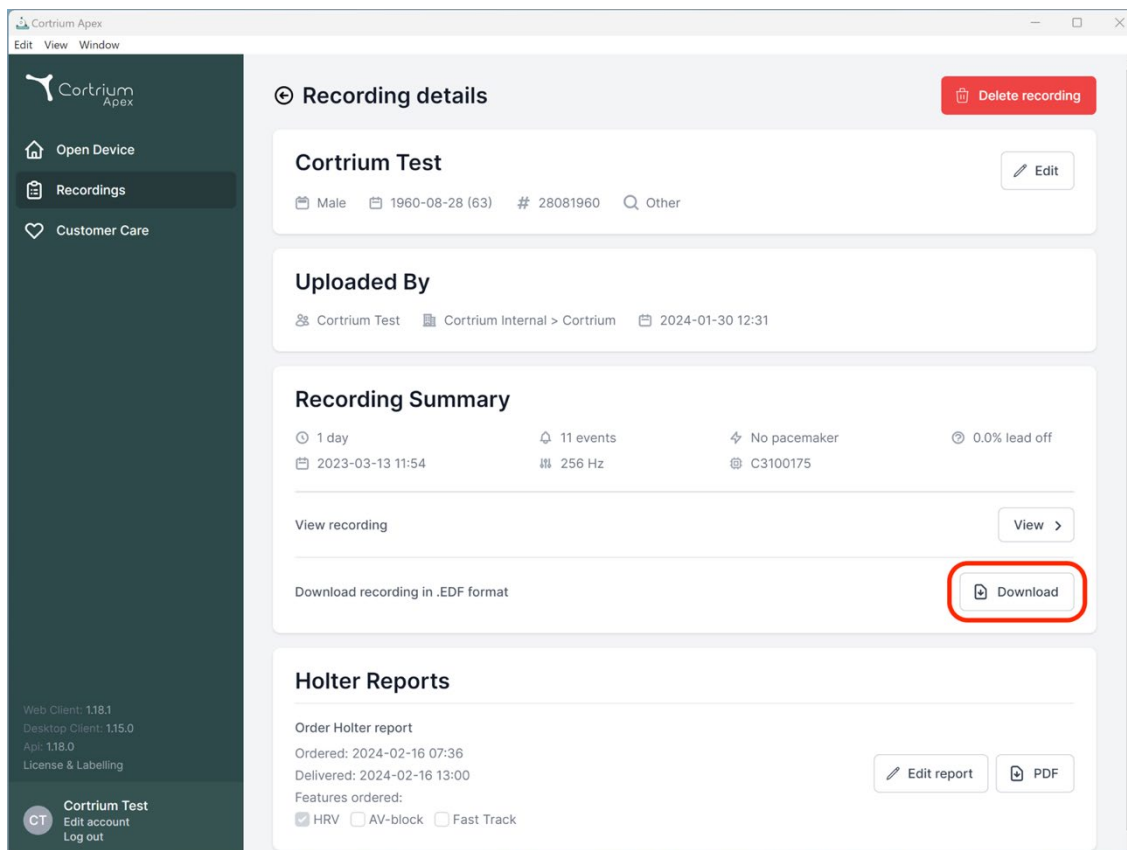


9.2 Kaip atsisiųsti EDF failą užsisakius ataskaitą

Jei ką tik užsisakėte įrašo ataskaitą ir dabar norite atsisiųsti įrašą EDF formatu, atlikite šiuos veiksmus:

- Kai įrenginys prijungtas, spustelėkite meniu punktą „Open device“ (Atidaryti įrenginį), tada spustelėkite šalia įrašo esantį mygtuką „View“ (Peržiūrėti).
- Ekrane „Recording details“ (Įrašo informacija) spustelėkite „Download“ (Atsisiųsti), kad atsisiųstumėte EDF failą.

Jei norite atsisiųsti ankstesnį įrašą EDF formatu:

- spustelėkite meniu elementą „Recordings“ (Įrašai);
- spustelėkite įrašą, kurį norite atsisiųsti EDF formatu;
- tada spustelėkite „Download“ (Atsisiųsti), kaip parodyta toliau

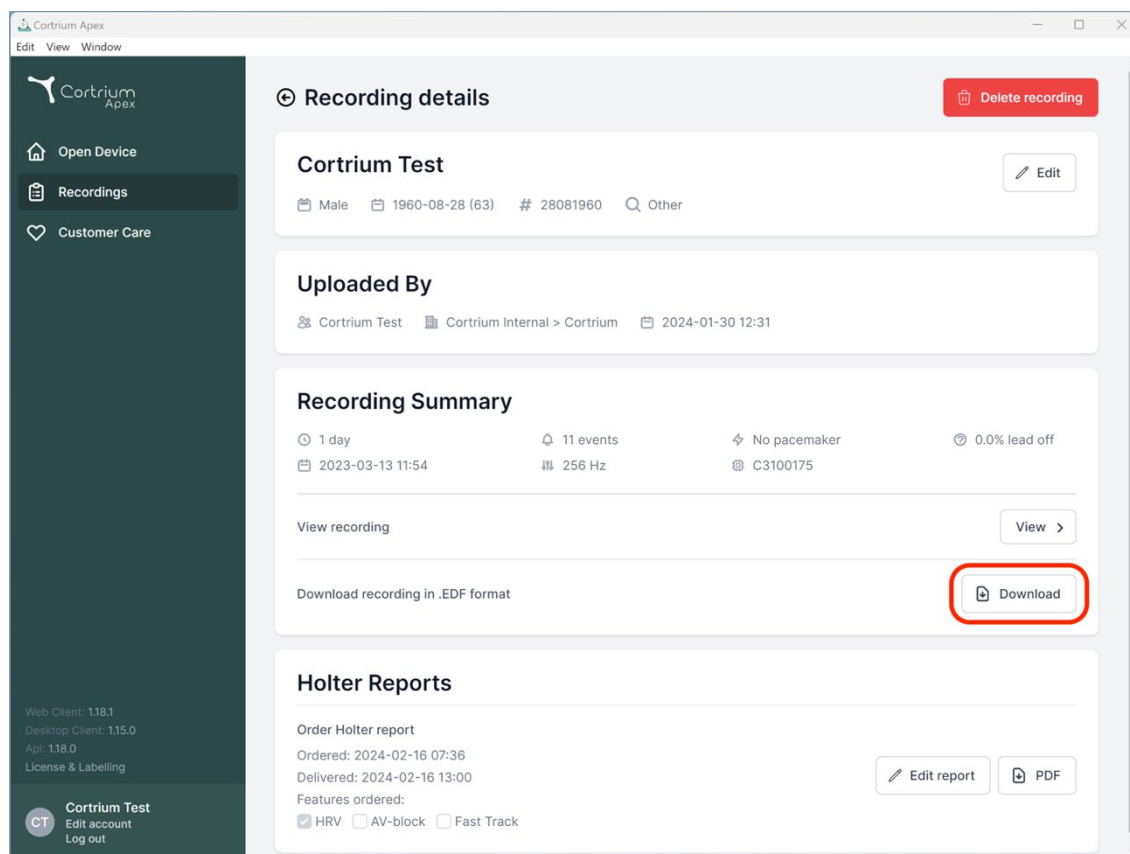

10. Atsijungimas nuo „Cortrium Apex“

Svarbu nepamiršti atsijungti nuo programos, paspaudžiant mygtuką „Log out“ (Atsijungti) kairiajame apatiniame kampe.

„Cortrium Apex“ automatiškai atsijungs nuo jūsų naudotojo paskyros po ilgesnio neveiklos laikotarpio.

Jei jūsų įstaigoje yra keli naudotojai, turintys atskiras „Cortrium Apex“ paskyras, tačiau naudotojai dirba su tuo pačiu kompiuteriu, būtinai atsijunkite nuo „Cortrium Apex“ baigę darbus.

11. Programinės įrangos atnaujinimai

Paleista programa automatiškai patikrina, ar yra prieinamų naujinių, ir iš karto juos įdiegia.

12. Minimalūs techniniai reikalavimai

Minimalūs „Cortrium Apex“ veikimo reikalavimai yra:

- „Windows 10“ arba „MacOS 11 Big Sur“ („Intel“).

- 1280 x 960 taškų ekrano skiriamoji geba.
- 4 GB RAM.
- 5 GB laisvos vietos standžiajame diske.
- Interneto ryšys.

„Cortrium Apex“ reikalingas interneto ryšys. Ryšio siuntimo greitis lemia laiką, kurio prireikia įrašui įkelti, kai užsakote ataskaitą arba konvertuojate įrašą į kitą formatą. Atsisiuntimo greitis lemia laiką, per kurį atsisiunčiamas konvertuotas įrašas.

Ataskaitos atsisiuntimas ir peržiūra paprastai užtrunka tik kelias sekundes, kai naudojamas 10 Mbps interneto ryšys.

13. Trikčių šalinimas

13.1 „Atrodo, kad prietaisas paruoštas pacientui...“

Jei matote įspėjimą: *„Warning. The device appears to be set up for a patient, but we cannot find the patient data in the system. Please set up a patient for the records“* (Įspėjimas. Atrodo, kad prietaisas paruoštas pacientui, tačiau sistemoje nerandame paciento duomenų. Nustatykite pacientą įrašams), tiesiog spustelėkite mygtuką „Add Patient Information“ (Pridėti paciento informaciją), kad nustatytumėte prietaisą naudoti su „Cortrium Apex“. Tai nepašalins įrašų iš įrenginio.

13.2 Įrašų suvestinėje rodoma „n/a lead off“ (laidų atjungimas netaikomas) arba „n/a events“ (įvykiai netaikomi)

Jei įrašymo santraukoje rodoma „n/a lead off“ (laidų atjungimas netaikomas) arba „n/a events“ (įvykiai netaikomi), taip yra todėl, kad prijungto C3w/C3+ įrenginio programinės aparatinės įrangos versija nepalaiko momentinio laidų atjungimo arba įvykių santraukos. Tačiau įrašas tebėra tinkamas.

13.3 Interneto ryšys nutrūko.

Jei matote pranešimą „Cortrium Apex is having trouble accessing the Internet“ („Cortrium Apex“ sunku prisijungti prie interneto), jūsų interneto ryšys galėjo būti pertrauktas arba nutrūko. Kreipkitės į savo įstaigos IT pagalbos tarnybą arba interneto paslaugų teikėją, kad padėtų atkurti interneto ryšį.

- „Cortrium Apex“ automatiškai vėl bando prisijungti prie interneto. Pranešime nurodoma, kada bus bandoma prisijungti kitą kartą
- Jei paleidus „Cortrium Apex“ nėra interneto ryšio, bus rodomas pranešimas, kad esate neprisijungę
- Jei nutrūkus interneto ryšiui vyko įrašo perkėlimas, gali tekti iš naujo pradėti perkėlimą, kai ryšys bus atkurtas

13.4 „Apex“ yra naujai įdiegta, bet neatsidaro

Ši problema gali kilti dėl užkardos, blokuojančios „Cortrium Apex“ programą. Jei „Apex“ nepaleidžiama dėl užkardos, įsitikinkite, kad 16 skyriuje „Pareiškimas dėl infrastruktūros“ pateiktos URL nuorodos užkardoje yra neblokuotos arba įtrauktos į baltąjį sąrašą. Pagalbos kreipkitės į savo įstaigos IT skyrių.

14. Saugumo informacija

Naudotojų valdymas

- Kiekvienas „Cortrium Apex“ naudotojas turi naudoti savo paskyrą. Galite sukurti ir ištrinti tiek naudotojų paskyrų, kiek reikia, adresu <https://apex.cortrium.com>. Svarbu, kad galėtumėte nustatyti ir kontroliuoti, kas turi prieigą prie neskelbtinų pacientų duomenų.

Slaptažodžiai

- Būtinai naudokite saugų slaptažodį
- Nesidalykite savo prisijungimo vardu ir (arba) slaptažodžiu su kitais
- Venkite naudoti tą patį slaptažodį kelioms paskyroms. Pakartotinai naudojant tą patį slaptažodį įsilaužėlis gali gauti prieigą prie visų jūsų sistemų ir kompiuterių, jei pažeidžiamas vos vienas slaptažodis.
- Nepamirškite atsijungti nuo „Cortrium Apex“
Jei liksite prisijungę, kitų naudotojų veiksmai sistemoje atrodys kaip jūsų

Šifravimas ir papildoma apsauga

Prieš įdiegiant „Cortrium Apex“ į kompiuterį, rekomenduojame:

- Įjungti disko šifravimą
Jei kompiuteris prarandamas arba pavagiamas, jame esančių neskelbtinų duomenų nebus galima perskaityti
- Įjungti automatinius sistemos atnaujinimus

Padidina tikimybę, kad kompiuteryje bus naujausi saugumo naujiniai

- Įjunkite integruotą saugumo programinę įrangą (pvz., „Windows Security“), jei yra
- Į „Windows“ integruota užkarda, apsauga nuo kenkėjiškos programinės įrangos, duomenų viliojimo ir virusų. Labai rekomenduojame ją įjungti.

15. Ženklinimas ir simboliai

Toliau vaizduojamas „Cortrium Apex“ ženklinimas ir simboliai:



Etiketės pavyzdys

Simbolis	Pavadinimas	Reikalavimas / pastaba
	Pagaminimo data	ISO 15223-1
	Žr. instrukcijų vadovą / knygelę	ISO 7000 - 1641
	Įspėjamasis ženklas	ISO 7000 - 0434A
	CE patvirtintas prietaisas su pranešančiosios įstaigos identifikavimo numeriu	MDR (ES/745/2017)
	Medicinos prietaisas	ISO 15223-1:2021

16. Pareiškimas dėl infrastruktūros

„Cortrium ApS“ pareiškia, kad jos produktas „Cortrium Apex“ įdiegtas „Microsoft Azure“ debesų kompiuterijos paslaugoje. Kai kurie URL adresai priklauso nuo produkto naudojimo vietos. Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti sistemos naudojami adresai:

URL	Aprašymas
api.apex.cortrium.com	„Cortrium Apex“ API.
viewer.apex.cortrium.com	„Cortrium“ įrašų peržiūros programos API.
apex.cortrium.com	„Cortrium Apex“ administratoriaus sąsaja.
client.apex.cortrium.com	„Cortrium Apex“ žiniatinklio klientas.
login.cortrium.com	„Auth0“ prisijungimo galinis punktas.
assets.apex.cortrium.com	Išteklių, pvz., „Desktop Client“, atsisiuntimas.
support.cortrium.com	Pagalbos svetainė.
cortriumukrecordingapex.blob.core.windows.net	Įrašų didelių dvejetainių duomenų saugykla (pietinė JK).
cortriumfrrecordingapex.blob.core.windows.net	Įrašų didelių dvejetainių duomenų saugykla (centrinė Prancūzija).
cortriumeurecordingapex.blob.core.windows.net	Įrašų didelių dvejetainių duomenų saugykla (vakarinė centrinė Vokietija).
cortriumaurecordingapex.blob.core.windows.net	Įrašų didelių dvejetainių duomenų saugykla (rytinė Australija).
rt.services.visualstudio.com dc.services.visualstudio.com	Naudojama „Microsoft Azure Application Insights“ (telemetrija).

443 prievadas (HTTPS) turi būti atidarytas visiems anksčiau nurodytiems URL adresams. Pirmosios 7 taisyklės šiame

sąrašė gali būti supaprastintos įtraukiant į baltąjį sąrašą visą „Cortrium“ domeną (*.cortrium.com). Tai taip pat sumažina riziką, kad ateityje, pasikeitus šiam sąrašui, reikės atlikti pakeitimus.

I priedas


i. Galimos integracijos

Toliau nurodytos integracijos priklauso nuo konkrečios šalies, todėl yra įjungtos ne visiems klientams:

- **GDT paciento failas**
Įgalina „Apex“ nustatyti pacientą naudojant GDT paciento failą.
- **DICOM paketuota ataskaita**
Įgalina „Apex“ atsisiųsti ataskaitą, paketuotą į DICOM formato paciento informaciją.
- **CPR paciento paieška**
Įgalina „Apex“ nustatyti paciento duomenis naudojant Danijos CPR numerio paiešką.
- **Paciento nukreipimas**
Paciento nukreipimo proceso metu sveikatos priežiūros specialistai, užsakydami įrašą, gali pridėti ir tvarkyti nukreipimo dokumentus. Taip užtikrinama, kad analizės ir ataskaitų teikimo proceso metu atitinkama paciento informacija būtų prieinama norint atlikti peržiūrą arba išrašyti sąskaitą.
- **Ataskaitos patvirtinimo eiga**
Ataskaitų patvirtinimo eiga užtikrina, kad prieš pateikiant ataskaitas užsakovui, trečiosios šalies patvirtintojas jas struktūriškai peržiūrėtų.
- **„Nereida“ paciento paieška ir ataskaitų teikimas**
Ši integracija leidžia ieškoti paciento ir automatiškai gauti ataskaitas iš trečiosios šalies „Nereida“ pacientų sistemos.

ii. GDT paciento failas

- Spustelēkite, kad pasirinktumėte arba vilkite GDT paciento failą į GDT įvesties lauką programoje „Apex“.
- Įkėlus failą užpildoma paciento informacija.
- Įkeltos informacijos redaguoti negalima.

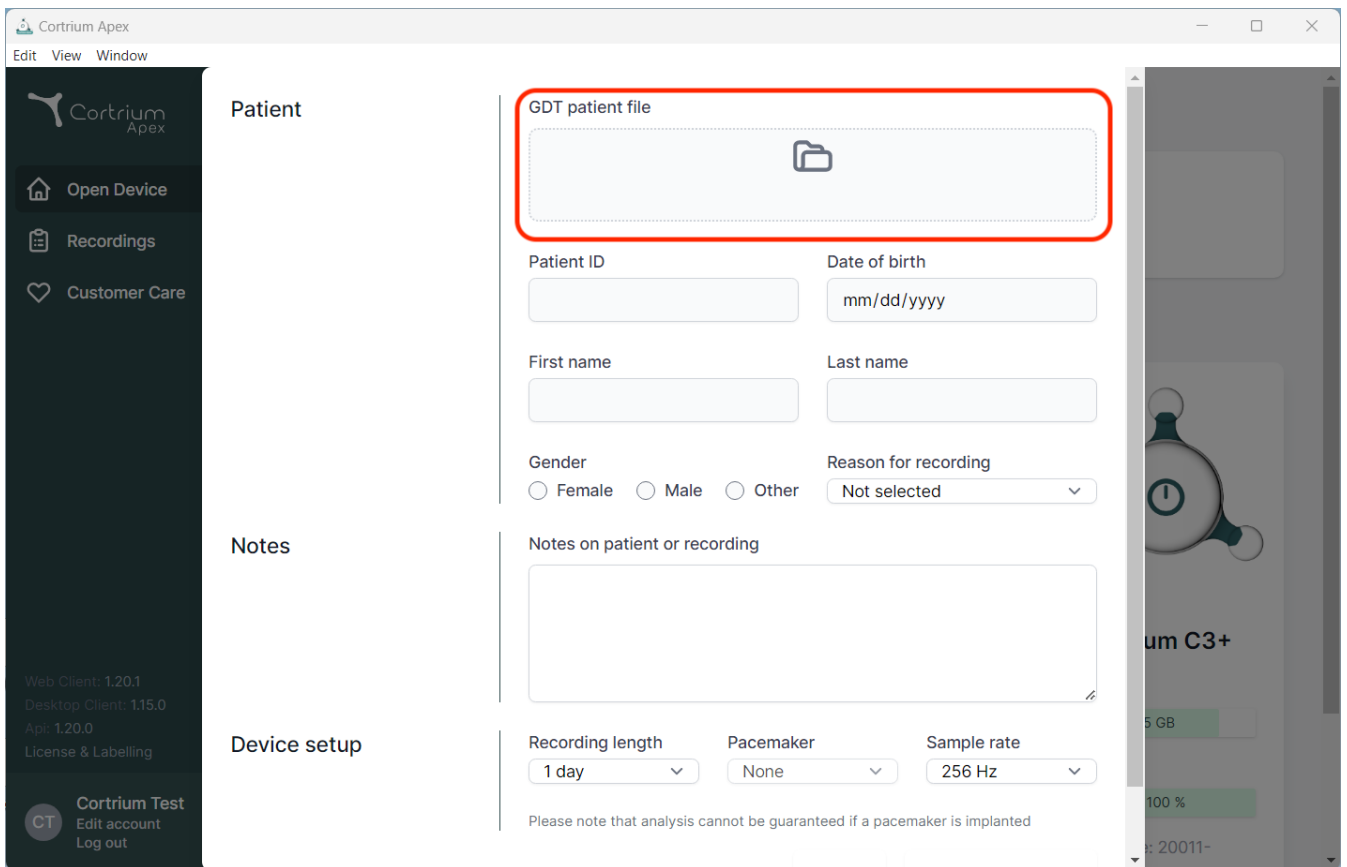

The screenshot displays the Cortrium Apex web application interface. The left sidebar contains navigation links: "Open Device", "Recordings", and "Customer Care". Below these are version details: "Web Client: 1.20.1", "Desktop Client: 1.15.0", "App: 1.20.0", and "License & Labelling". At the bottom of the sidebar is a "Cortrium Test" section with "Edit account" and "Log out" options.


The main content area is divided into three sections: "Patient", "Notes", and "Device setup".

- Patient section:** Contains a "GDT patient file" upload area (highlighted with a red box) with a folder icon. Below it are input fields for "Patient ID", "Date of birth" (with a "mm/dd/yyyy" placeholder), "First name", and "Last name". There are also radio buttons for "Gender" (Female, Male, Other) and a dropdown menu for "Reason for recording" (currently "Not selected").
- Notes section:** Contains a text area labeled "Notes on patient or recording".
- Device setup section:** Contains dropdown menus for "Recording length" (set to "1 day"), "Pacemaker" (set to "None"), and "Sample rate" (set to "256 Hz"). Below these is a disclaimer: "Please note that analysis cannot be guaranteed if a pacemaker is implanted".

On the right side of the interface, a partial view of a device screen is visible, showing a heart icon and the text "um C3+", "5 GB", "100 %", and "20011-".

iii. DICOM paketuota ataskaita

- Norėdami atsisiųsti DICOM paketuotą ataskaitą, spustelėkite atsisiuntimo mygtuką, esantį Holterio ataskaitos skiltyje po pasirinktu pacientu.
- Spustelėjus mygtuką, failas atsisiunčiamas, o failo pabaiga yra .DCM

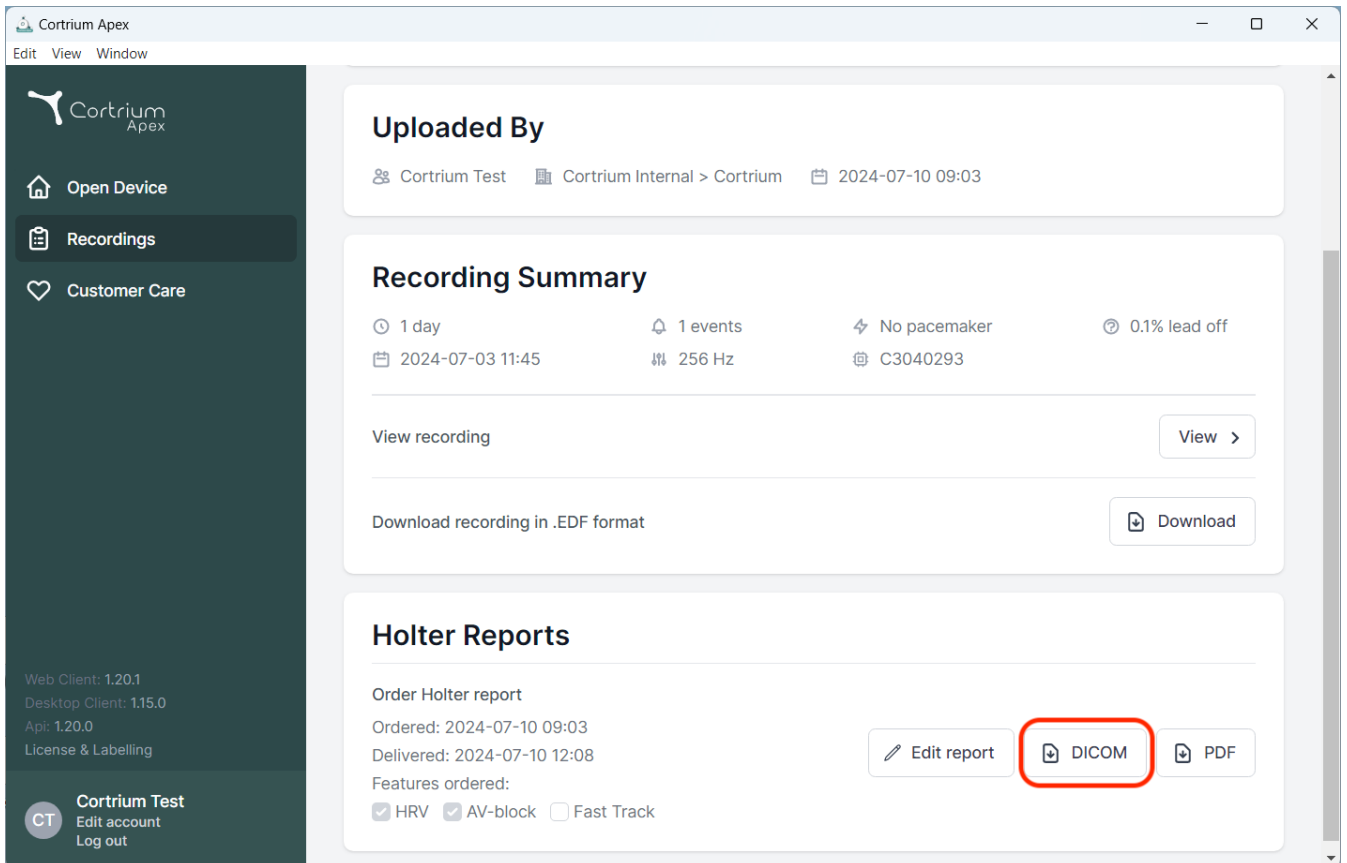

The screenshot displays the Cortrium Apex web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: 'Open Device', 'Recordings', and 'Customer Care'. The main content area is divided into three sections: 'Uploaded By', 'Recording Summary', and 'Holter Reports'.

Uploaded By
Cortrium Test | Cortrium Internal > Cortrium | 2024-07-10 09:03

Recording Summary
🕒 1 day | 📅 2024-07-03 11:45 | 🔔 1 events | 📡 256 Hz | ⚡ No pacemaker | 📶 0.1% lead off | 🏷️ C3040293

View recording [View >]


Download recording in .EDF format [Download]

Holter Reports
Order Holter report
Ordered: 2024-07-10 09:03
Delivered: 2024-07-10 12:08
Features ordered:
☒ HRV ☒ AV-block ☐ Fast Track

Buttons: [Edit report] [DICOM] [PDF]. The 'DICOM' button is highlighted with a red rectangle.

Footer (left sidebar):
Web Client: 1.20.1
Desktop Client: 1.15.0
Api: 1.20.0
License & Labelling
CT Cortrium Test
Edit account
Log out

- Stoties pavadinimas nustatomas pagal numatytąjį įrenginio / kompiuterio pavadinimą. Tai galima nustatyti patiems individualiame naudotojo profilyje, pasirinkus „Edit Account“ (Redaguoti paskyrą).

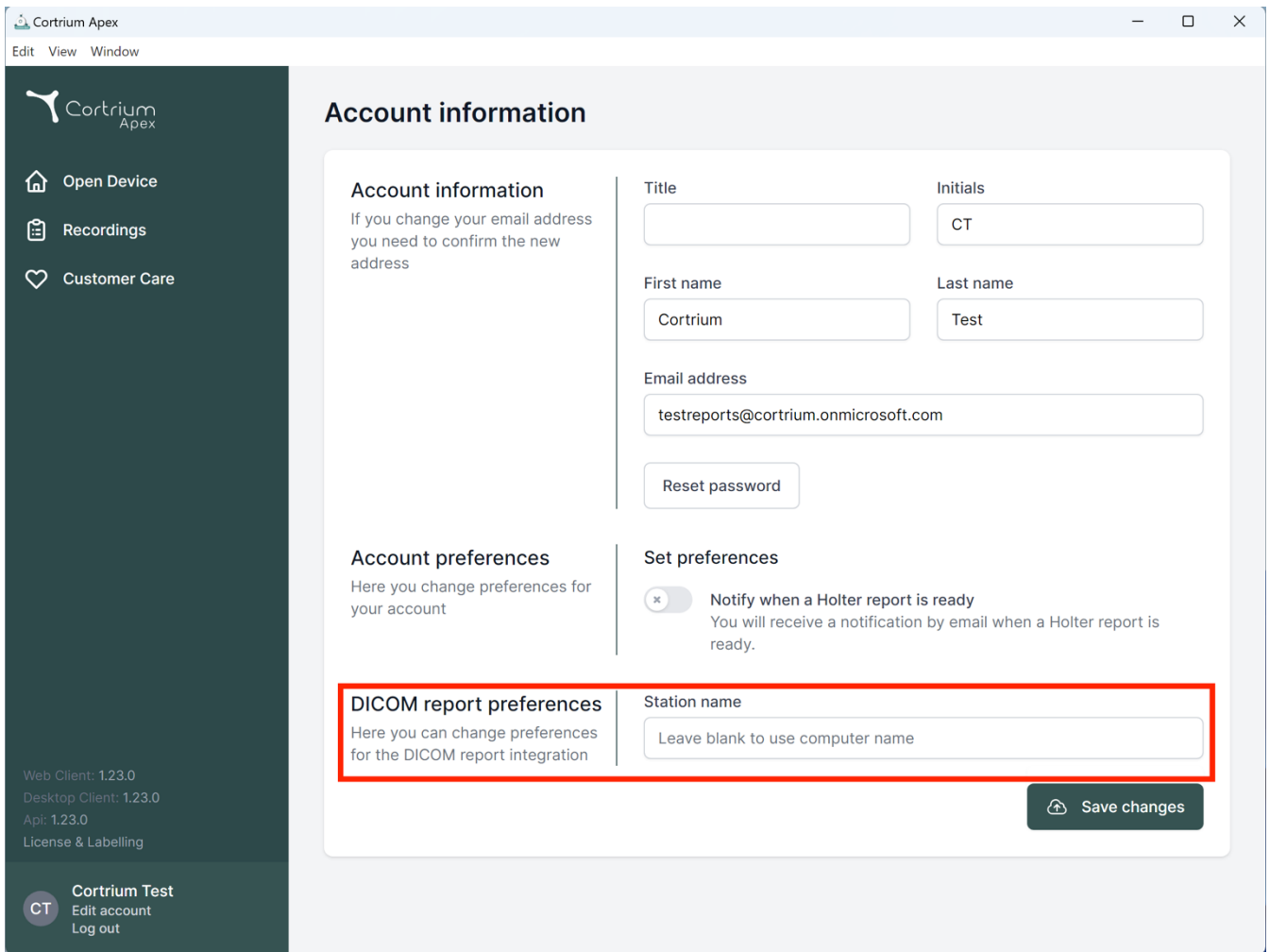

Account information

If you change your email address you need to confirm the new address

Title:

Initials:

First name:

Last name:

Email address:

[Reset password](#)

Account preferences

Here you change preferences for your account

Set preferences

☒ Notify when a Holter report is ready
You will receive a notification by email when a Holter report is ready.

DICOM report preferences

Here you can change preferences for the DICOM report integration

Station name:


[Save changes](#)

Web Client: 1.23.0
Desktop Client: 1.23.0
Api: 1.23.0
License & Labelling

Cortrium Test
CT Edit account Log out

iv. CPR paciento paieška

- Į lauką įveskite paciento danišką CPR ir paspauskite „Search“ (Ieškoti).
- Informacija apie pacientą gaunama iš CPR registro.
- Gauta informacija užpildoma paciento informacijos laukuose.
- Įkeltos informacijos redaguoti negalima.

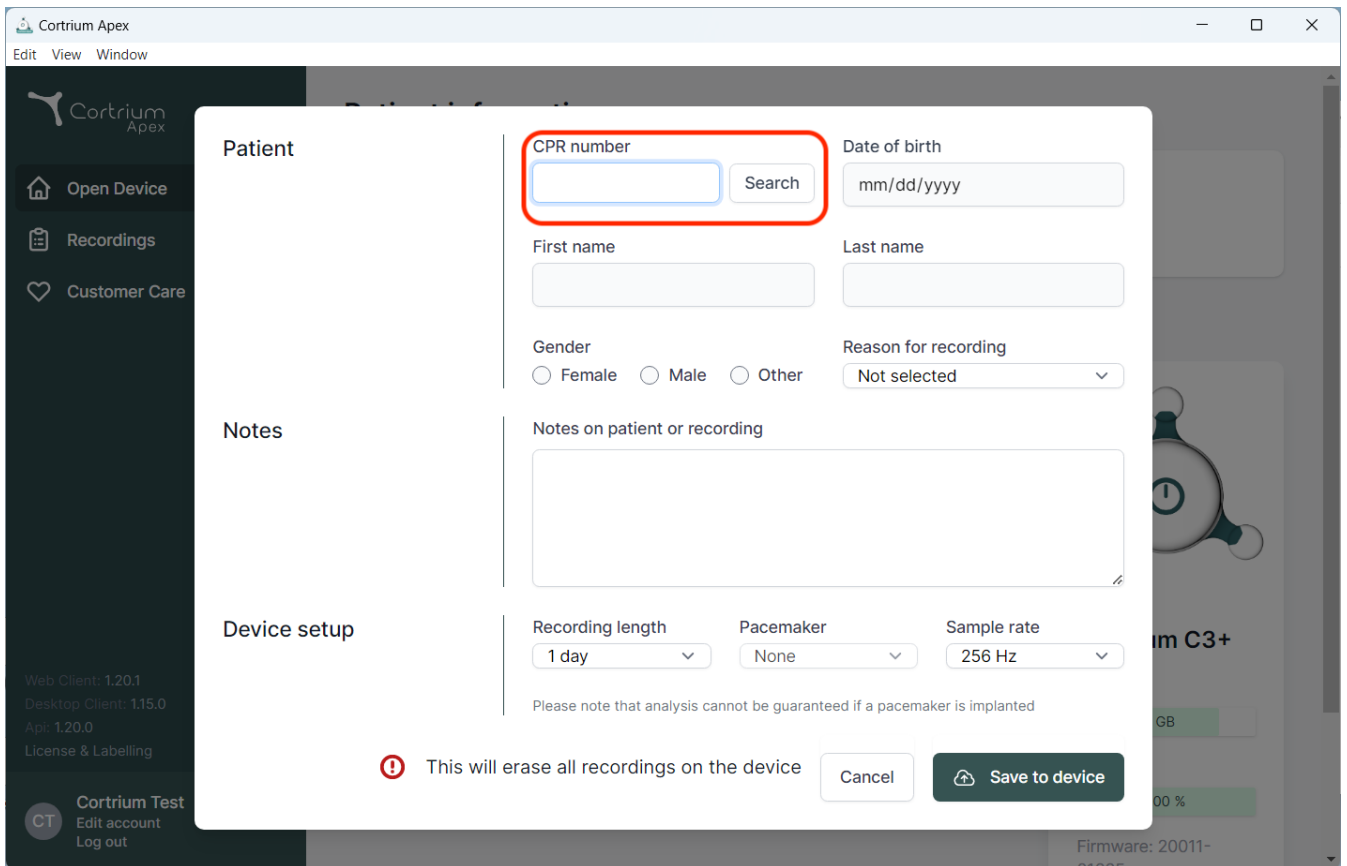

The screenshot shows the Cortrium Apex web application interface. A modal dialog titled "Patient" is open, allowing for patient search and data entry. The dialog is divided into three main sections: "Patient", "Notes", and "Device setup".

Patient Section:

- CPR number:** A text input field is highlighted with a red box, with a "Search" button next to it.
- Date of birth:** A text input field with a placeholder "mm/dd/yyyy".
- First name:** A text input field.
- Last name:** A text input field.
- Gender:** Radio buttons for "Female", "Male", and "Other".
- Reason for recording:** A dropdown menu currently showing "Not selected".

Notes Section:

- Notes on patient or recording:** A large text area for entering notes.

Device setup Section:

- Recording length:** A dropdown menu showing "1 day".
- Pacemaker:** A dropdown menu showing "None".
- Sample rate:** A dropdown menu showing "256 Hz".


Below the device setup section, there is a warning message: "Please note that analysis cannot be guaranteed if a pacemaker is implanted".

At the bottom of the dialog, there is a red warning icon and the text "This will erase all recordings on the device". To the right of this message are two buttons: "Cancel" and "Save to device".

The background of the application shows a sidebar with navigation options: "Open Device", "Recordings", and "Customer Care". The bottom of the sidebar includes version information (Web Client: 1.20.1, Desktop Client: 1.15.0, Api: 1.20.0), license information, and user details for "Cortrium Test" (Edit account, Log out).

v. Tik įkėlėjo vaidmuo

- Įgalinus vartotojui, vartotojas gali tik įkelti ir užsisakyti ataskaitas, nematydamas paciento informacijos ar ataskaitų.

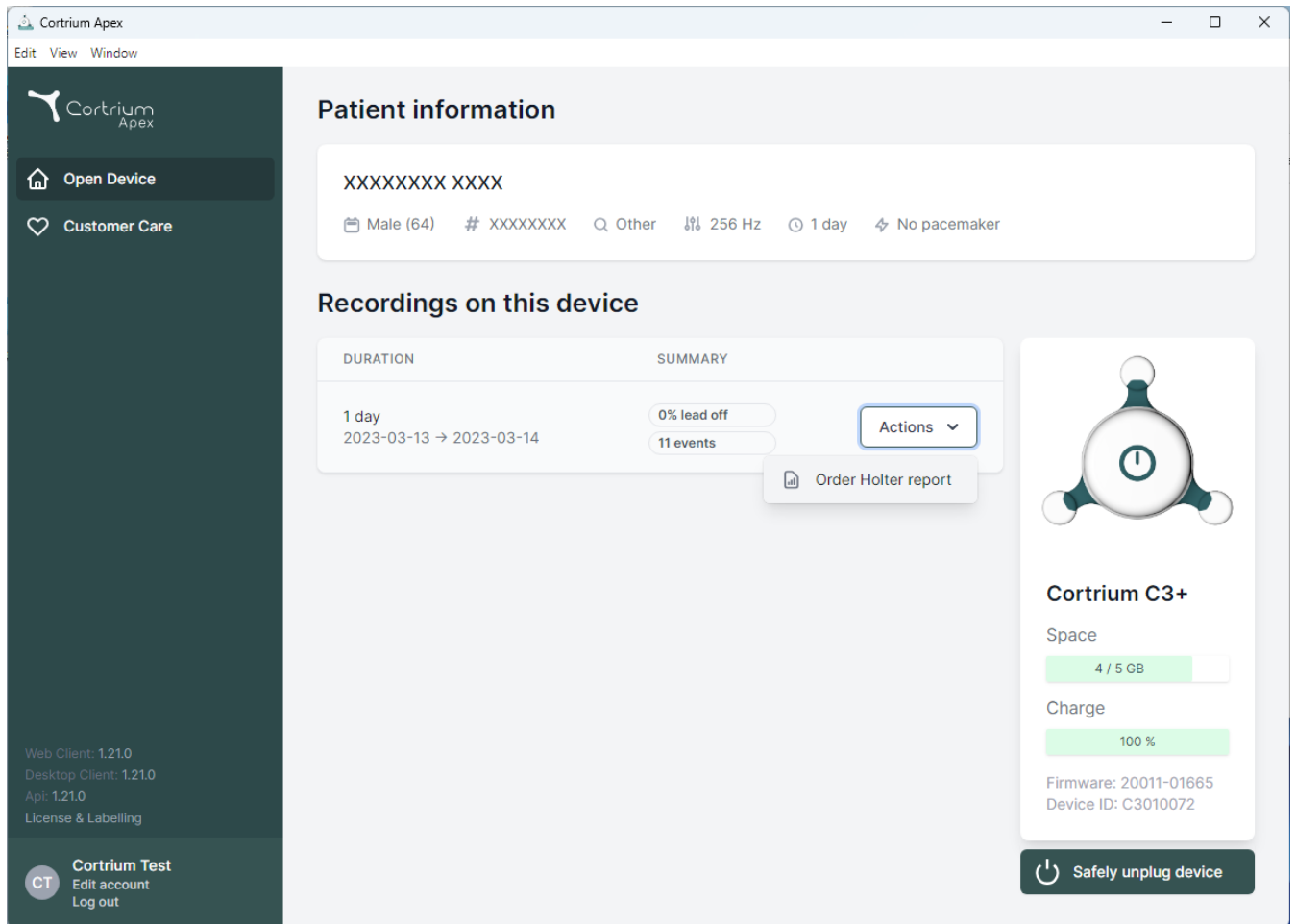


The screenshot displays the Cortrium Apex web application interface. The top navigation bar includes 'Edit', 'View', and 'Window' options. The left sidebar features the Cortrium Apex logo, 'Open Device' (with a house icon), 'Customer Care' (with a heart icon), and version information: 'Web Client: 1.21.0', 'Desktop Client: 1.21.0', 'Api: 1.21.0', and 'License & Labelling'. At the bottom of the sidebar is a 'Cortrium Test' section with a 'CT' icon, 'Edit account', and 'Log out' links.

The main content area is titled 'Patient information' and shows a patient ID 'XXXXXXXX XXXX'. Below this, patient details are listed: 'Male (64)', '# XXXXXXXX', 'Other', '256 Hz', '1 day', and 'No pacemaker'. The 'Recordings on this device' section contains a table with two columns: 'DURATION' and 'SUMMARY'. The table has one entry for '1 day' from '2023-03-13' to '2023-03-14', showing '0% lead off' and '11 events'. An 'Actions' dropdown menu is open, showing the option 'Order Holter report'. On the right side, there is a device status card for 'Cortrium C3+'. It displays a battery icon, 'Space' (4 / 5 GB), 'Charge' (100 %), 'Firmware: 20011-01665', and 'Device ID: C3010072'. At the bottom of this card is a 'Safely unplug device' button with a power icon.

DURATION	SUMMARY
1 day 2023-03-13 → 2023-03-14	0% lead off 11 events


vi. „Active Directory“ integravimas

- Įgalinus organizacijai, prisijungimo ekrane bus rodomas tinkintas tos organizacijos vieno prisijungimo registravimosi ekranas. Toliau yra „Cortrium“ prisijungimo ekranas; tikrasis prisijungimo raginimas gali atrodyti kitaip.

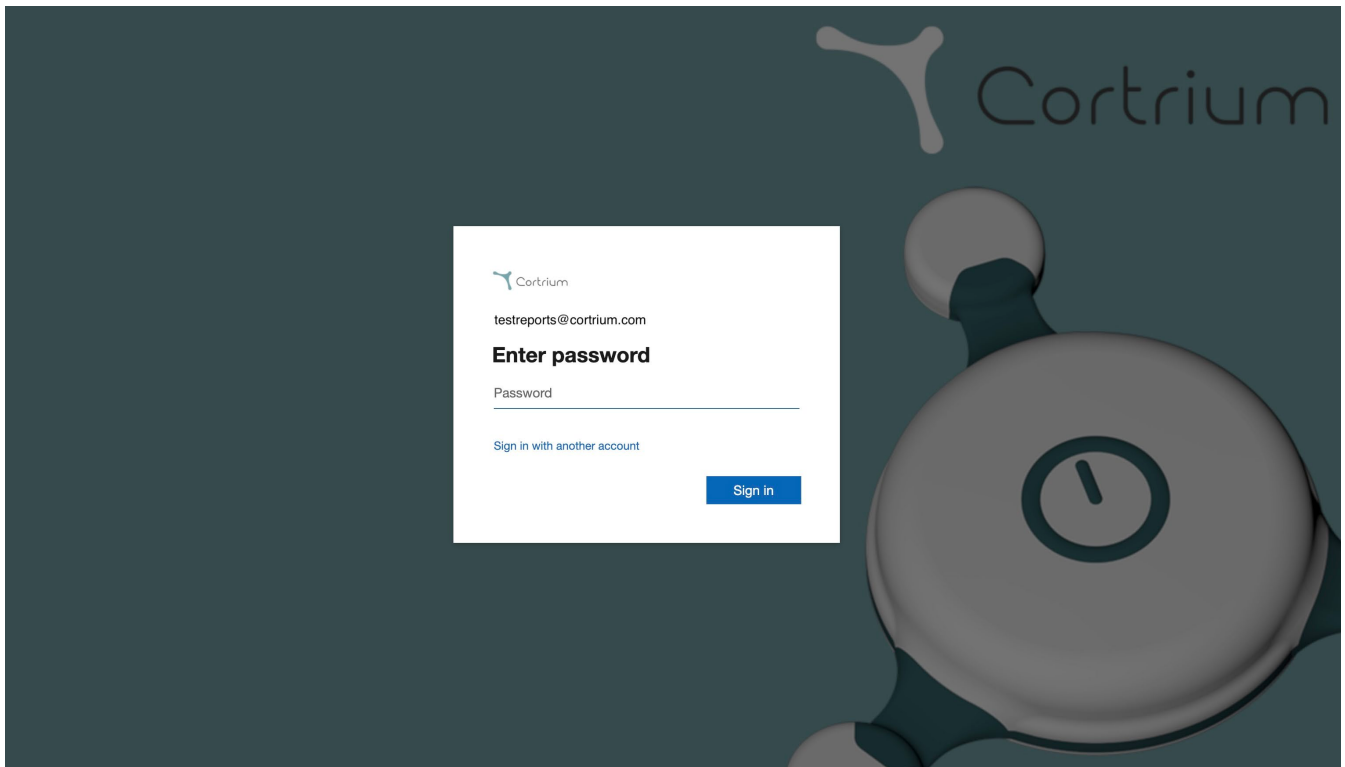

vii. Paciento nukreipimas

- Jei suaktyvinta nukreipimo integravimo funkcija, atsiras galimybė įkelti nukreipimo PDF failą.
- Spustelėkite „Select File“ (Pasirinkti failą) ir savo kompiuteryje pasirinkite atitinkamą paciento nukreipimo PDF failą.
- Įkėlimo metu nukreipimo PDF failas automatiškai pridedamas prie paciento įrašo.

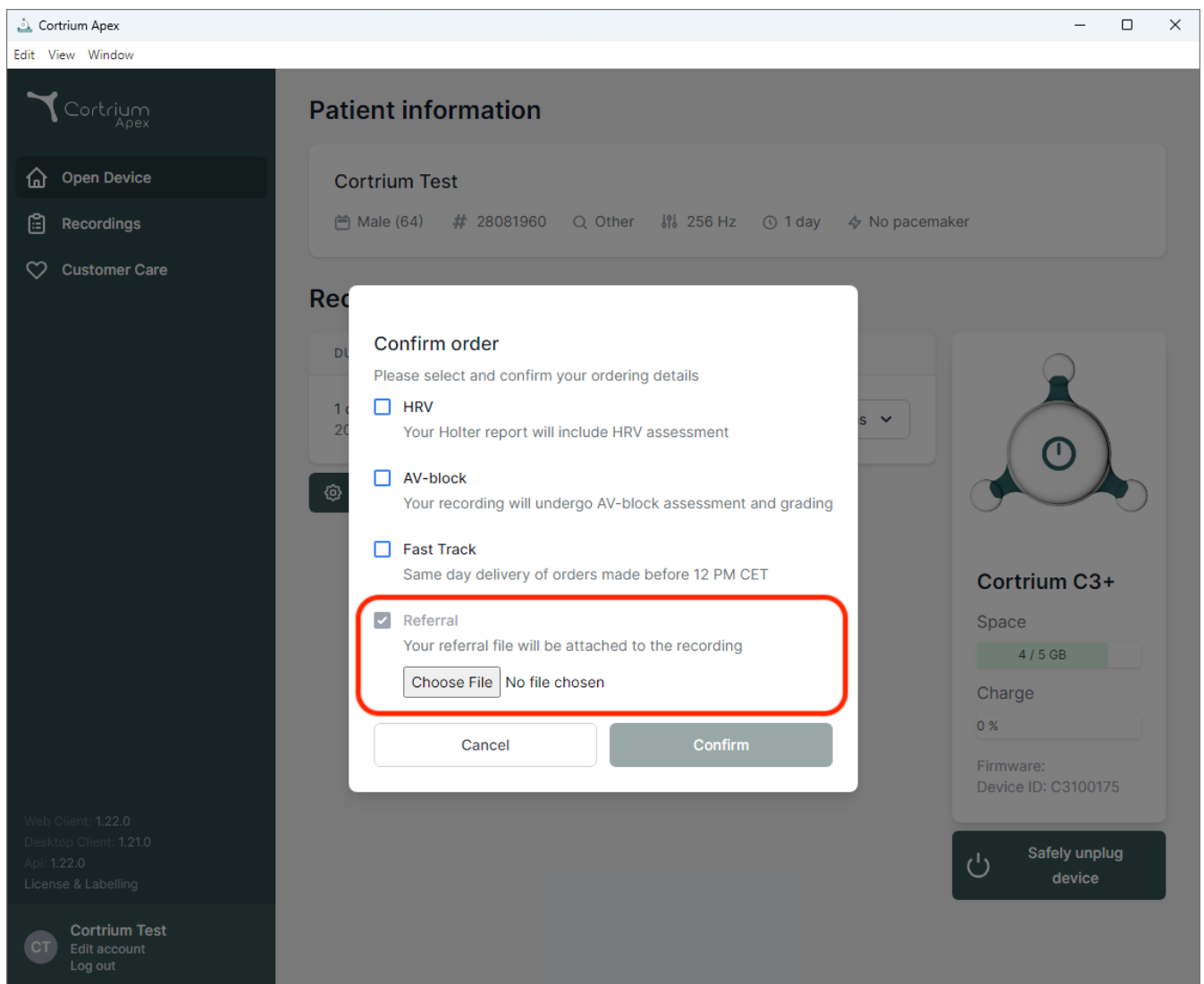

- Jei nukreipimo integravimo funkcija yra aktyvi ir įrašas buvo užsakytas, nukreipimą galima rasti įrašymo informacijos srityje.

Cortrium Apex

Edit View Window



Open Device

Recordings

Customer Care

Web Client: 1.22.0

Desktop Client: 1.21.0

Api: 1.22.0

License & Labelling

CT

Cortrium Test

Edit account

Log out

Recording details

Delete recording

Test Patient

Male

1950-10-01 (74)

12345678

Afib screening

Edit

Uploaded By

Test User 03

Distributor 01 > Approver Organisation > Test Clinic

2025-02-12 10:41

2025-02-12 10:41

Referral

Recording Summary

32 minutes

0 events

No pacemaker

0.0% lead off

2020-01-16 11:31

256 Hz

C3020195

View recording

View >

Convert to Cardioline format


Convert >

Holter Reports

Order Holter report

Ordered: 2025-02-12 10:41

- Mėlynas taškas ant įrašo rodinyje „Recordings“ (Įrašai) rodo, kad su konkrečia ataskaita susijęs pridėtas nukreipimas dar nebuvo atsisiųstas ar peržiūrėtas.

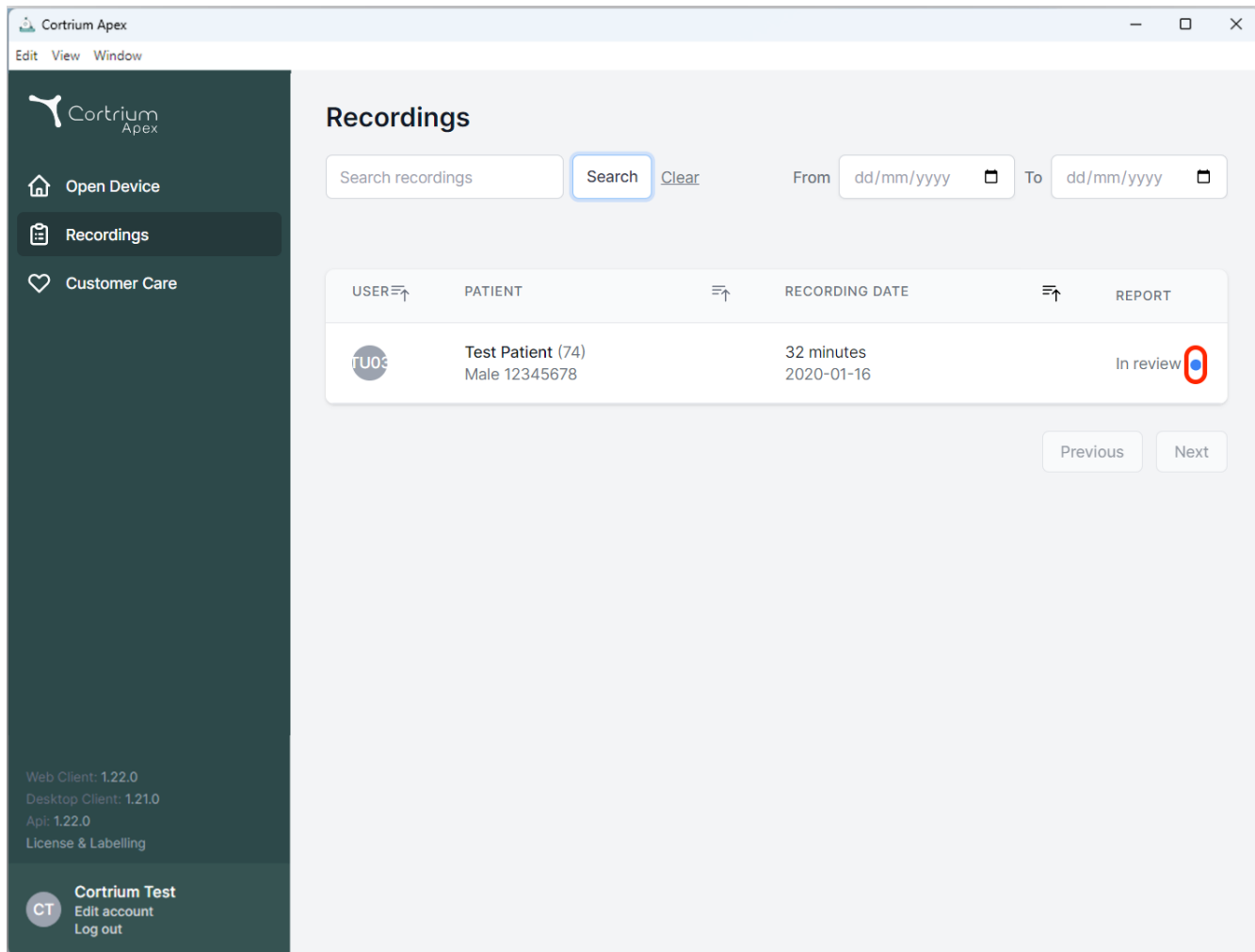

Cortrium Apex

Edit View Window

Cortrium Apex

Open Device

Recordings

Customer Care

Web Client: 1.22.0
Desktop Client: 1.21.0
Api: 1.22.0
License & Labelling

CT Cortrium Test
Edit account
Log out

Recordings


Search recordings [Clear](#)

From To

USER	PATIENT	RECORDING DATE	REPORT
TU03	Test Patient (74) Male 12345678	32 minutes 2020-01-16	In review

viii. Ataskaitos patvirtinimo eiga

- Jei patvirtinimo integravimo funkcija yra aktyvi ir įrašas buvo užsakytas, po analizės ataskaita bus prieinama įstaigos nariui, turinčiam patvirtinimo teises.
- Patvirtinimo laukiančias ataskaitas galite peržiūrėti pasirinkę „Awaiting Approval“ (Laukia patvirtinimo).
- Jei aktyvi nukreipimo integravimo funkcija, mėlynas taškas ant įrašo rodinyje „Recordings“ (Įrašai) rodo, kad pridėtas su konkrečia ataskaita susijęs nukreipimas dar nebuvo atsiųstas arba peržiūrėtas.

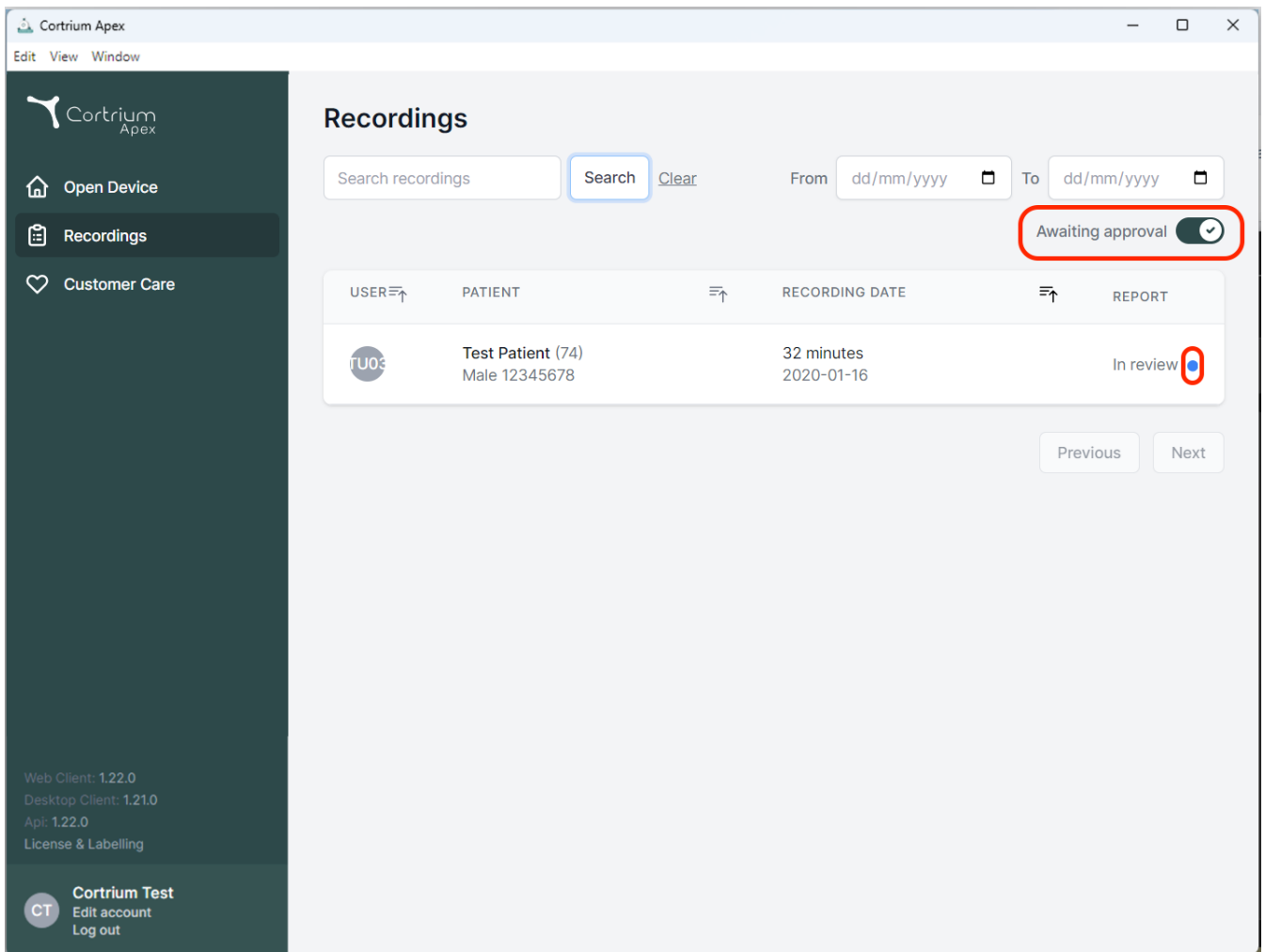

Recordings

Search recordings From dd/mm/yyyy To dd/mm/yyyy

Awaiting approval ☒


USER	PATIENT	RECORDING DATE	REPORT
U03	Test Patient (74) Male 12345678	32 minutes 2020-01-16	In review

Previous Next

Web Client: 1.22.0
Desktop Client: 1.21.0
Api: 1.22.0
License & Labelling

Cortrium Test
Edit account
Log out

- Ataskaitas, kurios laukia peržiūros, gali pasiekti ir peržiūrėti įstaigos narys, turintis patvirtinimo teises, pasiekęs išsamią įrašymo informaciją ir pasirinkęs „Review report“ (Peržiūrėti ataskaitą).

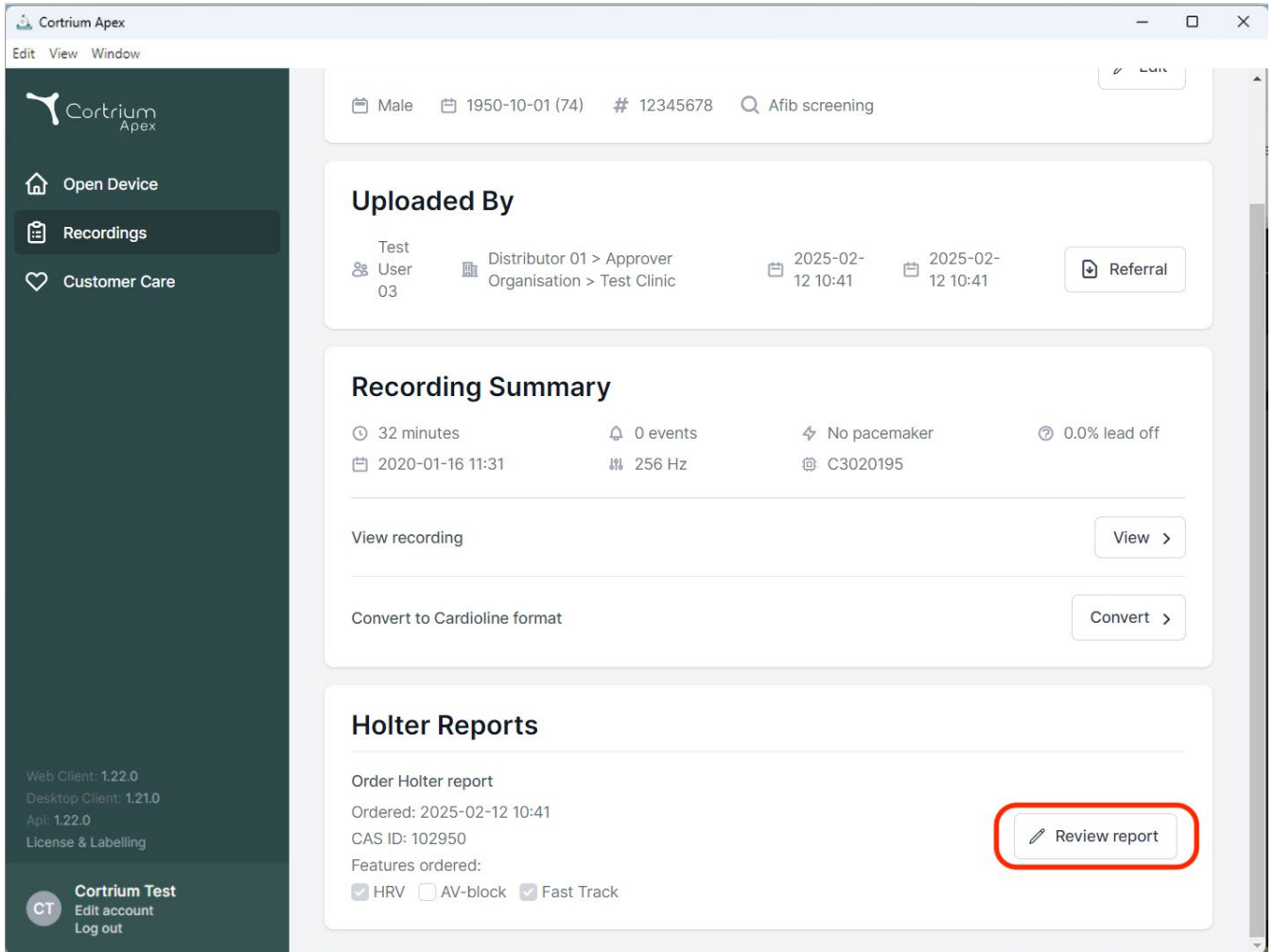

The screenshot displays the Cortrium Apex web application interface. The left sidebar contains navigation links: "Open Device", "Recordings", and "Customer Care". The main content area shows patient information: Male, 1950-10-01 (74), # 12345678, Afib screening. Below this is the "Uploaded By" section, showing Test User 03, Distributor 01 > Approver Organisation > Test Clinic, and upload dates 2025-02-12 10:41. A "Referral" button is present. The "Recording Summary" section displays: 32 minutes, 0 events, No pacemaker, 0.0% lead off, 2020-01-16 11:31, 256 Hz, and C3020195. It includes "View recording" and "Convert to Cardioline format" buttons. The "Holter Reports" section shows "Order Holter report", "Ordered: 2025-02-12 10:41", "CAS ID: 102950", and "Features ordered: HRV, AV-block, Fast Track". A "Review report" button is highlighted with a red rectangle.

Cortrium Apex

Edit View Window

Male 1950-10-01 (74) # 12345678 Afib screening

Uploaded By

Test User 03 Distributor 01 > Approver Organisation > Test Clinic 2025-02-12 10:41 2025-02-12 10:41 Referral

Recording Summary

32 minutes 0 events No pacemaker 0.0% lead off
2020-01-16 11:31 256 Hz C3020195

View recording View >

Convert to Cardioline format Convert >

Holter Reports


Order Holter report
Ordered: 2025-02-12 10:41
CAS ID: 102950
Features ordered:
☒ HRV ☐ AV-block ☒ Fast Track

Review report

Web Client: 1.22.0
Desktop Client: 1.21.0
Apl: 1.22.0
License & Labelling

CT Cortrium Test
Edit account
Log out

- Patvirtintojas turės galimybę peržiūrėti ataskaitą ir išvadas bei pridėti prie ataskaitos santraukos.
- Kai rodoma ataskaitos santrauka, prie santraukos pridedama informacija apie patvirtintoją, taip pat yra parinktis prie ataskaitos pridėti papildomų pastabų.
- Kai ataskaita peržiūrėta, ją galima patvirtinti paspaudus parinktį „Approve report“ (Patvirtinti ataskaitą).
- Patvirtinus ataskaitą, ji bus įteikiama užsakovui.
- Jei ataskaitos patvirtinti negalima, susisiekite su „Cortrium“ klientų aptarnavimo tarnyba ir nurodykite CAS ID (nurodytas išsamių įrašo duomenų dalies Holterio ataskaitoje).

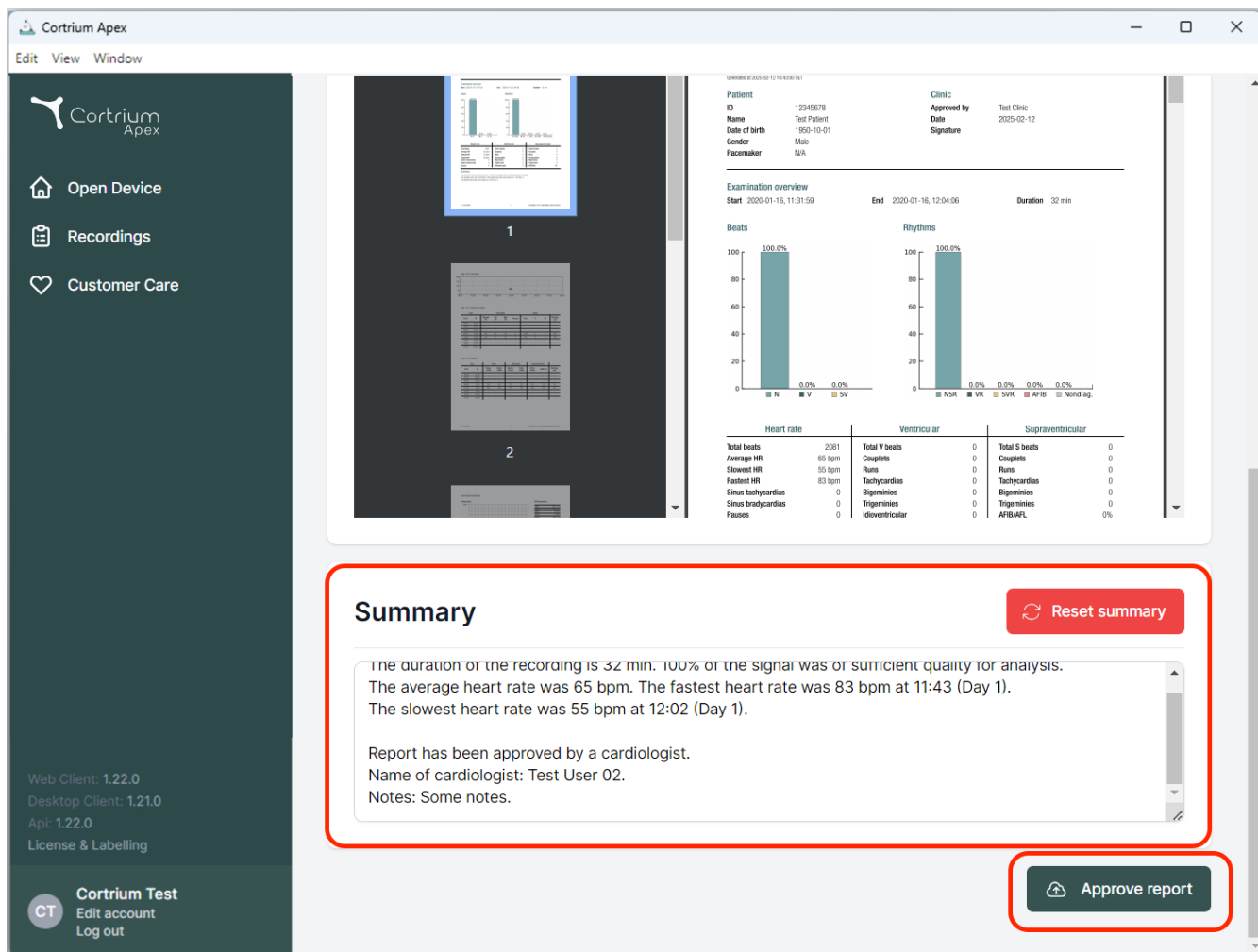

Cortrium Apex

Edit View Window

Open Device
Recordings
Customer Care

Web Client: 1.22.0
Desktop Client: 1.21.0
Api: 1.22.0
License & Labelling

Cortrium Test
Edit account
Log out

Summary Reset summary

The duration of the recording is 32 min. 100% of the signal was of sufficient quality for analysis.
The average heart rate was 65 bpm. The fastest heart rate was 83 bpm at 11:43 (Day 1).
The slowest heart rate was 55 bpm at 12:02 (Day 1).

Report has been approved by a cardiologist.
Name of cardiologist: Test User 02.
Notes: Some notes.

Approve report

Examination overview
Start: 2020-01-16, 11:31:59 End: 2020-01-16, 12:04:06 Duration: 32 min


Beats
100.0%
0.0% 0.0% 0.0%

Rhythms
100.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Heart rate		Ventricular		Supraventricular	
Total beats	2081	Total V beats	0	Total S beats	0
Average HR	65 bpm	Couplets	0	Couplets	0
Slowest HR	55 bpm	Runs	0	Runs	0
Fastest HR	83 bpm	Tachycardias	0	Tachycardias	0
Sinus tachycardia	0	Bigeminy	0	Bigeminy	0
Sinus bradycardia	0	Trigeminy	0	Trigeminy	0
Pauses	0	Idioventricular	0	AFIB/AFI	0%

ix. „Nereida“ paciento paieška ir ataskaitų teikimas

- Jei įjungta funkcija „Nereida Patient Lookup“ („Nereida“ paciento paieška), įvedus lydinčiosios kortelės numerį, bus atliekama paciento paieška ir „Apex“ įrenginio sąrankoje įvesta paciento informacija.
- Jei įjungtas automatinis „Nereida“ ataskaitų teikimas, parengtas ataskaitas bus galima gauti automatiškai.

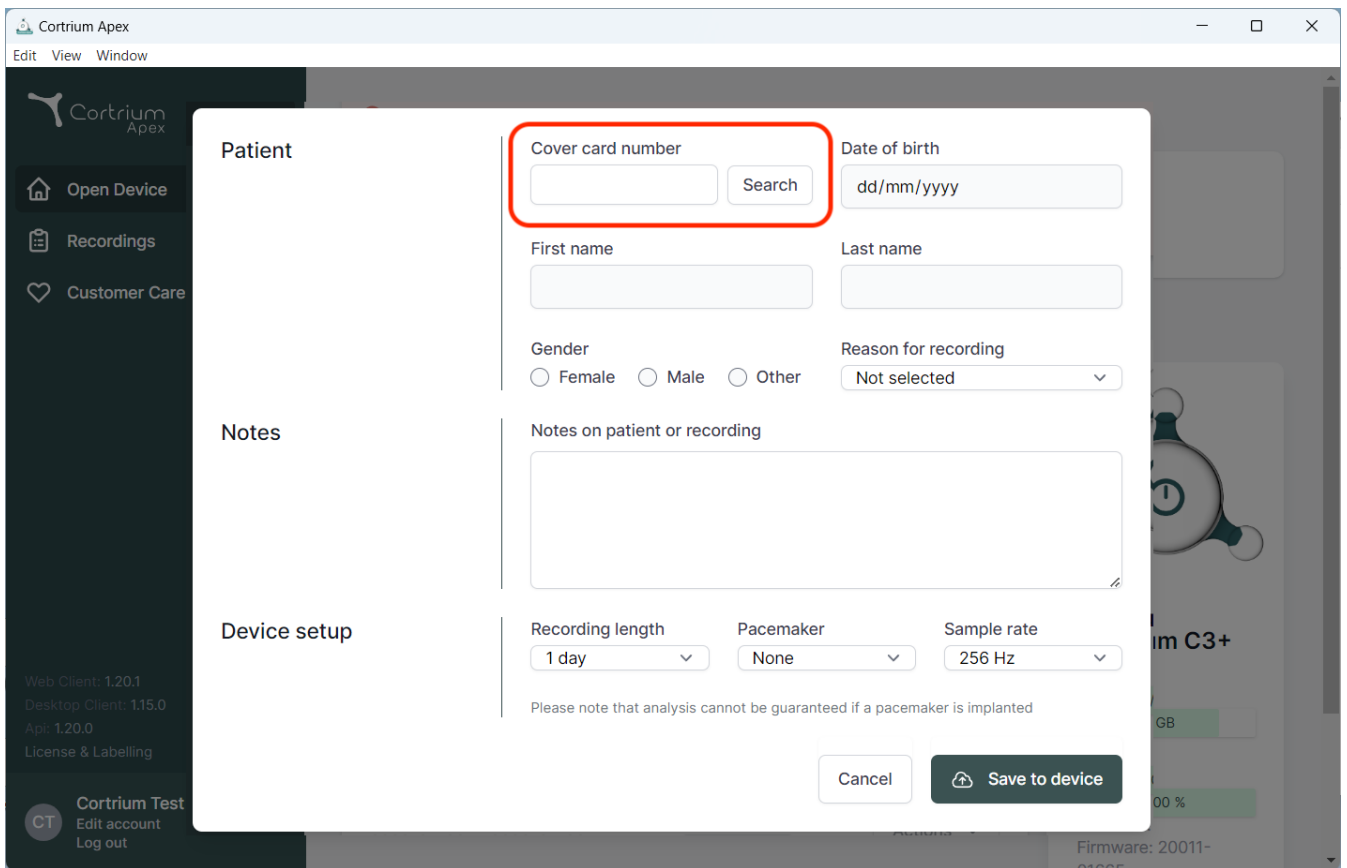

Cortrium Apex

Edit View Window

Patient

Cover card number Search

Date of birth

First name

Last name

Gender ☐ Female ☐ Male ☐ Other

Reason for recording

Notes

Notes on patient or recording

Device setup

Recording length

Pacemaker

Sample rate

Please note that analysis cannot be guaranteed if a pacemaker is implanted

Cancel



02/2025

„Cortrium ApS“ • Erik Husfeldts Vej 7 • DK-2630 Taastrup • Danija
El. paštas: info@cortrium.com • Interneto svetainė: www.cortrium.com

„Cortrium Apex“ UDI(01)05745000379033

CE
0123
46 / 46