


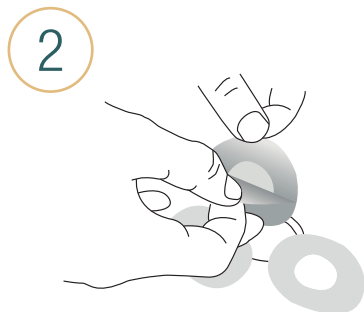
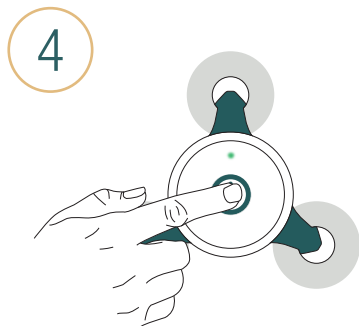
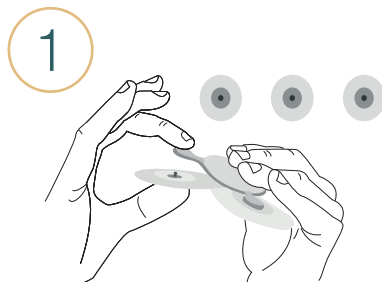


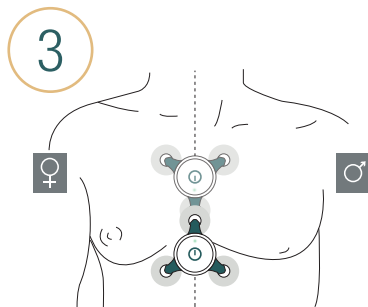


A

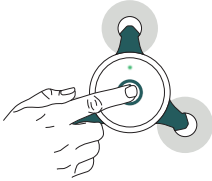

B

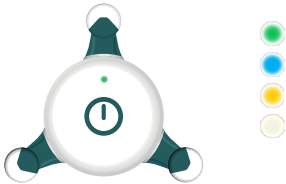

C

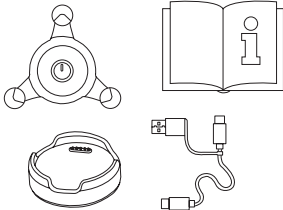

- 1 قم بتوصيل الأقطاب الكهربائية بكل موصل قطب كهربائي.
- 2 قم بإزالة البلاستيك من الأقطاب الكهربائية.
- 3 على خط منتصف القص. C3w وصل الجهاز بالمريض. ضع تأكد من أن الأقطاب الكهربائية تلتصق بالجسد بشكل صحيح. يرجى ملاحظة: قم بإزالة شعر الصدر لضمان ملاصقة الجسد بشكل صحيح.
- 4 بدء التسجيل.

- 1 ضغطات الزر
ضغط واحدة: بدء التشغيل / وضع علامة.
الضغط مرتين: تفعيل البلوتوث.
الضغط لمدة طويلة (3 ثوان) إيقاف التشغيل
(يرجى ملاحظة: يجب ألا يكون الجهاز متصلاً بالجسم).

- ب LED إشارات ضوء
ضوء أخضر
بطي: جاري التسجيل
سريع: بدء التشغيل/تم الضغط على زر الحدث
ثابت: مشحون بالكامل
ضوء أزرق
بطي: بث البلوتوث
سريع: الاقتران مع البلوتوث
ضوء أصفر
بطي: الذاكرة ممتلئة
سريع: البطارية منخفضة / إيقاف التشغيل
ثابت: جاري الشحن
ضوء أبيض
والجسم. C3w-سريع: تم اكتشاف إيقاف تشغيل السلك، حيث لا يوجد اتصال مناسب بين جهاز أو المورد. Cortrium ثابت: خطأ. اتصل بـ

- ج المكونات المُشتملة
، دليل قصير USB، مُنظم، كابل C3w شاشة

- 1 Прикрепете електродите към всеки конектор за електроди.
- 2 Отстранете пластмасата от електродите.
- 3 Прикрепете устройството към пациента. Поставете C3w на средната линия на гръдната кост. Уверете се, че електродите са добре прилепнали към кожата. Моля, обърнете внимание: Премахнете космите на гръдите за правилен контакт с кожата

4 Стартиране на запис.

A Натискания на бутони

Еднократно натискане Включване/маркиране на събитие
Двойно натискане Активиране на Bluetooth
Дълго натискане (3 секунди): Изключване (Забележка:

B Светлини известия на светодиода

Зелена светлина

Бавно: Тече запис

Бързо: Бутонът ВКЛЮЧВАНЕ/събитие е НАТИСНАТ

Константа: Напълно зареден Синя светлина

Бавно: Поточно предаване на Bluetooth

Бързо: Съвзаване с Bluetooth Жълта светлина

Бавно: Паметта е пълна

Бързо: Изтощена батерия/изключване

Константа: Зареждане Бяла светлина

Бързо: Открит е изключен проводник, C3w няма правилен контакт с тялото.

Константа: Грешка. Свържете се с Cortrium или госта-в-чика

C Включени компоненти

C3w монитор, адаптер, USB кабел, кратко ръководство

- 1 Причврстите електроде на всеки конектор електроде.
- 2 Уклоните пластiku са електрода.
- 3 Причврстите уређај на пацијента. Postavite C3w на srednju liniju. Uverite se da su elektrode pravilno zalepljene za kožu. Napomena: Uklonite dlačice na grudima radi pravilnog kontakta sa kožom.
- 4 Započnite snimanje.

A Pritisци на dugmad

Jedan pritisak: Uključite / označite događaj.

Dva pritiska: Aktivirajte Bluetooth.

Dugi pritisak (3 sekunde): Isključivanje (napomena: uređaj ne sme imati vezu sa telom).

B Obaveštenja putem LED svetla

Zeleno svetlo

Sporo: Snimanje je u toku

Brzo: Dugme za UKLJUČIVANJE / događaj je pritisnuto

Neprekidno: Potpuno napunjeno Plavo svetlo

Sporo: Striming putem Bluetooth-a

Brzo: Uparivanje sa Bluetooth-om Žuto svetlo

Sporo: Memorija je puna

Brzo: Slaba baterija / Isključivanje

Neprekidno: Punjenje Belo svetlo

Brzo: Detektovano ODVAJANJE provodnika, C3w nema odgovarajući kontakt sa telom.

Neprekidno: Greška. Kontaktirajte kompaniju Cortrium ili dobavljača.

C Uključene komponente

C3w monitor, adapter, USB kabl, kratki priručnik



www.cortrium.com/manuals

Cortrium C3w Holter Monitor

UDI-DI: 05745000379040



Cortrium ApS, Erik Husfeldts Vej 7
2630 Taastrup, Denmark

- ① **Ataşați electrozii la fiecare conector de electrod.**
- ② **Îndepărtați plasticul de pe electrozi.**
- ③ **Ataşați dispozitivul la pacient. Plasați C3w pe linia verticală din centrul pieptului.** Asigurați-vă că electrozii se lipesc corect de piele. Vă rugăm să rețineți: Îndepărtați părul de pe piept pentru un contact adecvat cu pielea.
- ④ **Începeți înregistrarea.**

A Apăsări de buton

O singură apăsare: Porniți / Marcați evenimentul.

Apăsări de două ori: Activați Bluetooth.

Apăsare lungă (3 secunde): Opriți (Observație: Dispozitivul nu trebuie să fie conectat la corp).

B Notificări luminoase LED

Lumină verde

Încet: Înregistrare în curs

Rapid: Pornirea / Butonul de eveniment apăsat

Constant: Complet încărcat

Lumina albastră

Încet: Streaming Bluetooth

Rapid: Asociere cu Bluetooth

Lumină galbenă

Încet: Memorie plină

Rapid: Baterie descărcată / Opre

Constant: Încărcare

Lumină albă

Rapid: Plumb OFF detectat, C3w nu are contact adecvat cu corpul.

Constant: Eroare. Contactați Cortrium sau furnizorul.

C Componente incluse

Monitor C3w, adaptor, cablu USB, manual sumar